

INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE MACOM

Introdução

Os Instrumentais Cirúrgicos Não Articulados Cortantes Macom são produtos para saúde utilizados **em intervenção e apoio cirúrgico, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais**. A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

Junto com os Instrumentais Cirúrgicos Não Articulados Cortantes Macom segue um *Guia para Conservação, Limpeza e Esterilização de Instrumentais Cirúrgicos*, com a intenção de oferecer orientações relativas aos cuidados necessários com o instrumental cirúrgico, tornando melhor o seu custo benefício e mantendo a performance dos instrumentais.

Especificações e características técnicas

Os Instrumentais Cirúrgicos Não Articulados Cortantes Macom são fabricados em aço inoxidável AISI 420, de acordo com a norma ANBT NBR ISO 7153-1.

Família de instrumentais que não apresenta articulação, possui corte na ponta, disponível em diversos tamanhos e diferentes formas, os quais definem o tipo e o código do produto.

Os Instrumentais Cirúrgicos Não Articulados Cortantes Macom são fornecidos na condição montado, pronto para uso. Produto não estéril, devendo ser esterilizado, obrigatoriamente, antes de sua utilização.

Formas de apresentação do produto com comparativo técnico entre cada modelo da família de Instrumentais Cirúrgicos Não Articulados Cortantes Macom:

MODELO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	IMAGEM
MA-1408	BISTURI BUCY 16CM CORTE P/ BAIXO	
MA-1409	BISTURI BUCY 16CM CORTE P/ BAIXO PONTA FINA	
MA-1408A	BISTURI BUCY 16CM CORTE P/ CIMA	
MA-1409A	BISTURI BUCY 16CM CORTE P/ CIMA PONTA FINA	
MA-1410	BISTURI FRAZIER 17CM	
MA-1410A	BISTURI OLIVERCRONA 23CM	
MA-1015	BROCA DE ROCHA 09MM	
MA-1015A	BROCA DE ROCHA 13MM	
MA-1015B	BROCA DE ROCHA 16MM	
MA-1491	BROCA DO CLOWARD 10MM	
MA-1491A	BROCA DO CLOWARD 12MM	
MA-1491B	BROCA DO CLOWARD 14MM	
MA-1491C	BROCA DO CLOWARD 16MM	
MA-2387	BROCA DO DRILL (CASPAR)	

MA-1966	BROCA DO TRÉPANO DE HUDSON 2MM	
MA-1019	BROCA P/ PERFURADOR CRUTHFIELD 1,5MM	
MA-1019A	BROCA P/ PERFURADOR CRUTHFIELD 2,0MM	
MA-1019B	BROCA P/ PERFURADOR CRUTHFIELD 2,5MM	
MA-1019C	BROCA P/ PERFURADOR CRUTHFIELD 3,0MM	
MA-8060C	CINZEL ALEXANDER 18CM 10MM	
MA-8060D	CINZEL ALEXANDER 18CM 12MM	
MA-8060E	CINZEL ALEXANDER 18CM 14MM	
MA-8060	CINZEL ALEXANDER 18CM 4MM	
MA-8060A	CINZEL ALEXANDER 18CM 6MM	
MA-8060B	CINZEL ALEXANDER 18CM 8MM	
MA-5888	CINZEL BRUENINGS 10MM	
MA-5766	CINZEL BRUENINGS 3MM	
MA-5767	CINZEL BRUENINGS 4MM	
MA-5768	CINZEL BRUENINGS 6MM	
MA-1052	CINZEL CERVICAL CLOWARD 17CM LÂMINA 4MM	
MA-1048J	CINZEL CLOWARD 24CM X 05MM	
MA-1048K	CINZEL CLOWARD 24CM X 08MM	
MA-1048	CINZEL CLOWARD 24CM X 10MM	
MA-1048A	CINZEL CLOWARD 24CM X 12MM	
MA-1048B	CINZEL CLOWARD 24CM X 14MM	
MA-1048L	CINZEL CLOWARD 24CM X 15MM	
MA-1048C	CINZEL CLOWARD 24CM X 16MM	
MA-1048D	CINZEL CLOWARD 24CM X 18MM	
MA-1048E	CINZEL CLOWARD 24CM X 20MM	
MA-1048F	CINZEL CLOWARD 24CM X 22MM	
MA-1048G	CINZEL CLOWARD 24CM X 24MM	
MA-8267	CINZEL COTTLE 18,5CM 12MM	
MA-1991	CINZEL COTTLE 18,5CM 4MM	
MA-1051	CINZEL D'ERRICO 20CM LÂMINA 13MM	
MA-7773	CINZEL GARDNER 18CM X 14MM	
MA-2882	CINZEL HIBBS 22CM X 10MM	
MA-2882A	CINZEL HIBBS 22CM X 13MM	
MA-2882B	CINZEL HIBBS 22CM X 16MM	
MA-2882C	CINZEL HIBBS 22CM X 19MM	
MA-2882D	CINZEL HIBBS 22CM X 25MM	
MA-2882E	CINZEL HIBBS 22CM X 28MM	

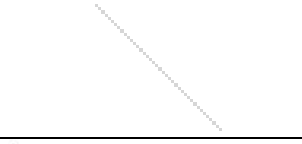
MA-5850B	CINZEL HOKE 13CM X 10MM	
MA-5850C	CINZEL HOKE 13CM X 13MM	
MA-5850D	CINZEL HOKE 13CM X 19MM	
MA-5850	CINZEL HOKE 13CM X 4MM	
MA-5850A	CINZEL HOKE 13CM X 6MM	
MA-1370	CINZEL KILLIAN	
MA-1049	CINZEL LAMBOTTE 26CM X 10MM	
MA-1049A	CINZEL LAMBOTTE 26CM X 12MM	
MA-1049B	CINZEL LAMBOTTE 26CM X 14MM	
MA-1049C	CINZEL LAMBOTTE 26CM X 16MM	
MA-1049D	CINZEL LAMBOTTE 26CM X 18MM	
MA-1049E	CINZEL LAMBOTTE 26CM X 20MM	
MA-1049F	CINZEL LAMBOTTE 26CM X 22MM	
MA-1049G	CINZEL LAMBOTTE 26CM X 24MM	
MA-4171B	CINZEL LEXER 22CM X 10MM	
MA-4171C	CINZEL LEXER 22CM X 15MM	
MA-4171D	CINZEL LEXER 22CM X 20MM	
MA-4171E	CINZEL LEXER 22CM X 25MM	
MA-4171F	CINZEL LEXER 22CM X 30MM	
MA-4171	CINZEL LEXER 22CM X 5MM	
MA-4171A	CINZEL LEXER 22CM X 7MM	
MA-5948	CINZEL LUCAS 16CM X 3MM	
MA-6499	CINZEL LUCAS 16CM X 4MM	
MA-1050	CINZEL MACOM 20CM X 5MM	
MA-1050A	CINZEL MACOM 20CM X 6,5MM	
MA-1050B	CINZEL MACOM 20CM X 8MM	
MA-1837	CINZEL STILLE 20CM X 10MM	
MA-1837A	CINZEL STILLE 20CM X 15MM	
MA-1837B	CINZEL STILLE 20CM X 20MM	
MA-1837C	CINZEL STILLE 20CM X 25MM	
MA-5394	CINZEL U.S. ARMY 18CM X 12MM	
MA-5395	CINZEL U.S. ARMY 18CM X 18MM	
MA-5393	CINZEL U.S. ARMY 18CM X 6MM	
MA-6508	CINZEL WAGNER CURVO 4,0MM	
MA-6507	CINZEL WAGNER CURVO 5,0MM	
MA-5205	CINZEL WAGNER CURVO 6,0MM	
MA-6317	CINZEL WAGNER CURVO 8,0MM	
MA-6956	CINZEL WAGNER RETO 4,0MM	
MA-6506	CINZEL WAGNER RETO 5,0MM	
MA-5205A	CINZEL WAGNER RETO 6,0MM	
MA-5205C	CINZEL WAGNER RETO 8,0MM	
MA-5205B	CINZEL WAGNER SEPTO NASAL	

MA-4253	CINZEL WEST 16CM X 3MM	
MA-4253A	CINZEL WEST 16CM X 4MM	
MA-5551	CURETA 25CM PONTA ANGULADA FIG. 0	
MA-5287	CURETA 25CM PONTA ANGULADA FIG. 00	
MA-5549	CURETA 25CM PONTA ANGULADA FIG. 000	
MA-5288	CURETA 25CM PONTA ANGULADA FIG. 1	
MA-5289	CURETA 25CM PONTA RETA FIG. 0	
MA-5550	CURETA 25CM PONTA RETA FIG. 00	
MA-5548	CURETA 25CM PONTA RETA FIG. 000	
MA-9326	CURETA 25CM PONTA RETA FIG. 1	
MA-6086	CURETA BECKMANN N°01	
MA-6087	CURETA BECKMANN N°02	
MA-3955	CURETA BECKMANN N°03	
MA-3954	CURETA BECKMANN N°04	
MA-3956	CURETA BECKMANN N°05	
MA-0067	CURETA BRUNS 17CM FIG. 0	
MA-0065	CURETA BRUNS 17CM FIG. 00	
MA-0066	CURETA BRUNS 17CM FIG. 000	
MA-0068	CURETA BRUNS 17CM FIG. 01	
MA-0069	CURETA BRUNS 17CM FIG. 02	
MA-0070	CURETA BRUNS 17CM FIG. 03	
MA-0071	CURETA BRUNS 17CM FIG. 04	
MA-0072	CURETA BRUNS 17CM FIG. 05	
MA-0073	CURETA BRUNS 17CM FIG. 06	
MA-1961B	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA ANG. FIG. 0	
MA-1961A	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA ANG. FIG. 00	
MA-1961	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA ANG. FIG. 000	
MA-1961C	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA ANG. FIG. 1	
MA-1960B	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA RETA FIG. 0	
MA-1960A	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA RETA FIG. 00	
MA-1960	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA RETA FIG. 000	
MA-1960C	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA RETA FIG. 1	
MA-1962	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA RETA P/ TRÁS 3MM	
MA-1962A	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA RETA P/ TRÁS 4MM	
MA-1962B	CURETA BUSHE 26,5CM PONTA RETA P/ TRÁS 5MM	
MA-2425	CURETA C/ DENTES 28CM FIG.1	
MA-1964B	CURETA CASPAR 22CM PONTA ANG. FIG. 0	
MA-1964A	CURETA CASPAR 22CM PONTA ANG. FIG. 00	
MA-1964	CURETA CASPAR 22CM PONTA ANG. FIG. 000	
MA-1965	CURETA CASPAR 22CM PONTA QUADRADA 4MM	
MA-1965A	CURETA CASPAR 22CM PONTA QUADRADA 5MM	
MA-1965B	CURETA CASPAR 22CM PONTA QUADRADA 6MM	
MA-1965D	CURETA CASPAR 22CM PONTA QUADRADA 8MM	
MA-1965E	CURETA CASPAR 22CM PONTA QUADRADA 9MM	
MA-1963B	CURETA CASPAR 22CM PONTA RETA FIG. 0	
MA-1963A	CURETA CASPAR 22CM PONTA RETA FIG. 00	
MA-1963	CURETA CASPAR 22CM PONTA RETA FIG. 000	

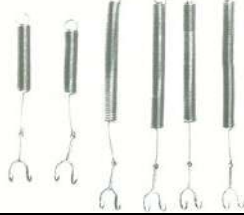
MA-3693	CURETA CASPAR 25CM PONTA QUADRADA 4MM	
MA-3693A	CURETA CASPAR 25CM PONTA QUADRADA 5MM	
MA-1965C	CURETA CASPAR 35CM PONTA QUADRADA 6MM	
MA-3693B	CURETA CASPAR ANG. 27CM PONTA ANG. QUADRADA 3MM	
MA-3693C	CURETA CASPAR ANG. 27CM PONTA ANG. QUADRADA 4MM	
MA-6945	CURETA COBB CURVA 22CM FIG. 0	
MA-6944	CURETA COBB CURVA 22CM FIG. 00	
MA-6943	CURETA COBB CURVA 22CM FIG. 000	
MA-6946	CURETA COBB CURVA 22CM FIG. 01	
MA-6941	CURETA COBB RETA 22CM FIG. 0	
MA-6940	CURETA COBB RETA 22CM FIG. 00	
MA-6939	CURETA COBB RETA 22CM FIG. 000	
MA-6942	CURETA COBB RETA 22CM FIG. 01	
MA-8080	CURETA DAUBENSPECK ANG FIG. 0 20CM	
MA-6466	CURETA DAUBENSPECK ANG FIG. 00 20CM	
MA-8081	CURETA DAUBENSPECK ANG FIG. 000 20CM	
MA-6463	CURETA DAUBENSPECK ANG FIG. 0000 20CM	
MA-4122	CURETA EPSTEIN 43CM PONTA ANG. 40° P/ TRÁS 3X6MM	
MA-4123	CURETA EPSTEIN 50CM PONTA ANG. 30° P/ TRÁS 6X9MM	
MA-6473	CURETA FAHLBUSCH MALEÁVEL BAIONETA 2,5X260MM	
MA-6473A	CURETA FAHLBUSCH MALEÁVEL BAIONETA VAZADA 2,5X260MM	
MA-1090A	CURETA HALLE MALEÁVEL 22CM FIG. 0	
MA-1090	CURETA HALLE MALEÁVEL 22CM FIG. 00	
MA-1090B	CURETA HALLE MALEÁVEL 22CM FIG. 1	
MA-1090C	CURETA HALLE MALEÁVEL 22CM FIG. 2	
MA-1090D	CURETA HALLE MALEÁVEL 22CM FIG. 3	
MA-1393E	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 45° P/ ESQUERDA 3MM	
MA-1393C	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 45° P/ DIREITA 3MM	
MA-1394C	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 45° P/ DIREITA 5MM	
MA-1393D	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 90° P/ DIREITA 3MM	
MA-1394F	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 90° P/ DIREITA 5MM	
MA-1393B	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 90° P/ ESQUERDA 3MM	
MA-1394B	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 90° P/ ESQUERDA 5MM	
MA-1393	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 90° P/ FRENTE 3MM	
MA-1394	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 90° P/ FRENTE 5MM	
MA-1393A	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 90° P/ TRÁS 3MM	
MA-1394A	CURETA HARDY BAIONETA 26CM ANG. 90° P/ TRÁS 5MM	
MA-1394D	CURETA HARDY BAIONETA 26CM CURVA P/ DIREITA 5MM	
MA-1394E	CURETA HARDY BAIONETA 26CM CURVA P/ ESQUERDA 5MM	
MA-6474	CURETA LANDOLT-REULEN RÍGIDA BAIONETA 2,5X260MM	

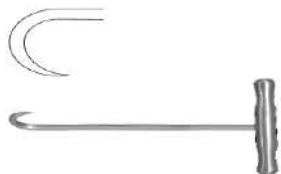
MA-6467	CURETA LEMPert 215MM BOCA 1,8MM	
MA-6467A	CURETA LEMPert 215MM BOCA 2,0MM	
MA-6467B	CURETA LEMPert 215MM BOCA 2,4MM	
MA-6467C	CURETA LEMPert 215MM BOCA 2,6MM	
MA-6467D	CURETA LEMPert 215MM BOCA 2,8MM	
MA-4788	CURETA MALIS BAIONETA 20CM PONTA 2MM	
MA-0075	CURETA MEYHOEFER Nº0 AURICULAR 13CM	
MA-0076	CURETA MEYHOEFER Nº01 AURICULAR 13CM	
MA-0077	CURETA MEYHOEFER Nº02 AURICULAR 13CM	
MA-0078	CURETA MEYHOEFER Nº03 AURICULAR 13CM	
MA-0079	CURETA MEYHOEFER Nº04 AURICULAR 13CM	
MA-0080	CURETA MEYHOEFER Nº05 AURICULAR 13CM	
MA-1390A	CURETA NICOLA 21,5CM BOCA 6,5MM	
MA-1390	CURETA NICOLA 21,5CM BOCA 6,5MM CURVA P/ DIREITA	
MA-1391	CURETA NICOLA 21,5CM BOCA 6,5MM CURVA P/ ESQUERDA	
MA-2621	CURETA NOVAK 23CM 3,0MM P/ BIÓPSIA UTERINA	
MA-2621A	CURETA NOVAK 23CM 3,5MM P/ BIÓPSIA UTERINA	
MA-2621B	CURETA NOVAK 23CM 4,0MM P/ BIÓPSIA UTERINA	
MA-5080B	CURETA RECAMIER (JOGO FIG. 00 A FIG. 10)	
MA-3894A	CURETA RECAMIER FIG. 0 31CM CORTANTE	
MA-3894	CURETA RECAMIER FIG. 0 31CM ROMBA	
MA-3095A	CURETA RECAMIER FIG. 00 31CM CORTANTE	
MA-3895	CURETA RECAMIER FIG. 00 31CM ROMBA	
MA-0081A	CURETA RECAMIER FIG. 1 31CM CORTANTE	
MA-0081	CURETA RECAMIER FIG. 1 31CM ROMBA	
MA-9002A	CURETA RECAMIER FIG. 10 31CM CORTANTE	
MA-9002	CURETA RECAMIER FIG. 10 31CM ROMBA	
MA-0082A	CURETA RECAMIER FIG. 2 31CM CORTANTE	
MA-0082	CURETA RECAMIER FIG. 2 31CM ROMBA	
MA-0083A	CURETA RECAMIER FIG. 3 31CM CORTANTE	
MA-0083	CURETA RECAMIER FIG. 3 31CM ROMBA	
MA-0084A	CURETA RECAMIER FIG. 4 31CM CORTANTE	
MA-0084	CURETA RECAMIER FIG. 4 31CM ROMBA	
MA-0085A	CURETA RECAMIER FIG. 5 31CM CORTANTE	
MA-0085	CURETA RECAMIER FIG. 5 31CM ROMBA	
MA-0086A	CURETA RECAMIER FIG. 6 31CM CORTANTE	
MA-0086	CURETA RECAMIER FIG. 6 31CM ROMBA	
MA-0087A	CURETA RECAMIER FIG. 7 31CM CORTANTE	
MA-0087	CURETA RECAMIER FIG. 7 31CM ROMBA	
MA-5080A	CURETA RECAMIER FIG. 8 31CM CORTANTE	
MA-5080	CURETA RECAMIER FIG. 8 31CM ROMBA	
MA-9001A	CURETA RECAMIER FIG. 9 31CM CORTANTE	
MA-9001	CURETA RECAMIER FIG. 9 31CM ROMBA	

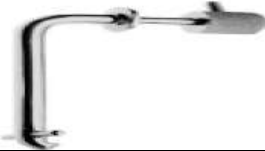
MA-0094	CURETA SCHROEDER (JOGO Nº01 AO 06)	
MA-0088	CURETA SCHROEDER Nº01 30CM	
MA-0089	CURETA SCHROEDER Nº02 30CM	
MA-0090	CURETA SCHROEDER Nº03 30CM	
MA-0091	CURETA SCHROEDER Nº04 30CM	
MA-0092	CURETA SCHROEDER Nº05 30CM	
MA-0093	CURETA SCHROEDER Nº06 30CM	
MA-1595	CURETA SCOVILLE 50CM PONTA RETA 9X15MM	
MA-1092N	CURETA SIMON 30CM PONTA ANG. FIG. 0	
MA-1092M	CURETA SIMON 30CM PONTA ANG. FIG. 00	
MA-1092L	CURETA SIMON 30CM PONTA ANG. FIG. 000	
MA-1092K	CURETA SIMON 30CM PONTA ANG. FIG. 0000	
MA-1092O	CURETA SIMON 30CM PONTA ANG. FIG. 01	
MA-1092P	CURETA SIMON 30CM PONTA ANG. FIG. 02	
MA-1092Q	CURETA SIMON 30CM PONTA ANG. FIG. 03	
MA-1092R	CURETA SIMON 30CM PONTA ANG. FIG. 04	
MA-1092S	CURETA SIMON 30CM PONTA ANG. FIG. 05	
MA-1092T	CURETA SIMON 30CM PONTA ANG. FIG. 06	
MA-1091M	CURETA SIMON 30CM PONTA RETA FIG. 0	
MA-1091L	CURETA SIMON 30CM PONTA RETA FIG. 00	
MA-1091K	CURETA SIMON 30CM PONTA RETA FIG. 000	
MA-1091J	CURETA SIMON 30CM PONTA RETA FIG. 0000	
MA-1091N	CURETA SIMON 30CM PONTA RETA FIG. 01	
MA-1091O	CURETA SIMON 30CM PONTA RETA FIG. 02	
MA-1091P	CURETA SIMON 30CM PONTA RETA FIG. 03	
MA-1091Q	CURETA SIMON 30CM PONTA RETA FIG. 04	
MA-1092C	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 0	
MA-1092B	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 00	
MA-1092A	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 000	
MA-1092	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 0000	
MA-1092U	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 000000	
MA-1092D	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 1	
MA-1092E	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 2	
MA-1092F	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 3	
MA-1092G	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 4	
MA-1092H	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 5	
MA-1092I	CURETA SIMON PONTA 22CM ANG. FIG. 6	
MA-1091C	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG. 0	
MA-1091B	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG. 00	
MA-1091A	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG. 000	
MA-1091	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG. 0000	
MA-1091D	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG. 1	
MA-1091E	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG. 2	
MA-1091F	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG. 3	
MA-1091G	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG. 4	
MA-1091H	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG. 5	
MA-1091I	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG. 6	
MA-1091R	CURETA SIMON PONTA 22CM RETA FIG.000000	

MA-8119	CURETA SIMS (JOGO FIG. 1 A FIG. 6)	
MA-5042	CURETA SIMS FIG. 1	
MA-5045	CURETA SIMS FIG. 2	
MA-5046	CURETA SIMS FIG. 3	
MA-5047	CURETA SIMS FIG. 4	
MA-5049	CURETA SIMS FIG. 5	
MA-5048	CURETA SIMS FIG. 6	
MA-1782	CURETA TESSIER 22CM BOCA 6MM	
MA-3697	CURETA TESSIER 30CM BOCA 6MM	
MA-1570	CURETA VOLKMANN FIG. 0 17CM	
MA-1569	CURETA VOLKMANN FIG. 00 17CM	
MA-1568	CURETA VOLKMANN FIG. 000 17CM	
MA-1576	CURETA VOLKMANN FIG. 0000 17CM	
MA-1571	CURETA VOLKMANN FIG. 1 17CM	
MA-1572	CURETA VOLKMANN FIG. 2 17CM	
MA-1573	CURETA VOLKMANN FIG. 3 17CM	
MA-1574	CURETA VOLKMANN FIG. 4 17CM	
MA-1577	CURETA VOLKMANN FIG. 5 17CM	
MA-1578	CURETA VOLKMANN FIG. 6 17CM	
MA-0095	CURETA WALLICH N°01 42CM	
MA-0096	CURETA WALLICH N°02 42CM	
MA-0097	CURETA WALLICH N°03 42CM	
MA-1385A	ENUCLEADOR HARDY BAION. 24CM PTA P/ DIR. CORTANTE 2,4MM	
MA-1387A	ENUCLEADOR HARDY BAION. 24CM PTA P/ DIR. CORTANTE 3,4MM	
MA-1385	ENUCLEADOR HARDY BAION. 24CM PTA P/ DIR. ROMBA 2,4MM	
MA-1387	ENUCLEADOR HARDY BAION. 24CM PTA P/ DIR. ROMBA 3,4MM	
MA-1386A	ENUCLEADOR HARDY BAION. 24CM PTA P/ ESQ. CORTANTE 2,4MM	
MA-1388A	ENUCLEADOR HARDY BAION. 24CM PTA P/ ESQ. CORTANTE 3,4MM	
MA-1386	ENUCLEADOR HARDY BAION. 24CM PTA P/ ESQ. ROMBA 2,4MM	
MA-1388	ENUCLEADOR HARDY BAION. 24CM PTA P/ ESQ. ROMBA 3,4MM	
MA-8110	ESTILETE BIOLIVAR 14CM	
MA-0143	ESTILETE BIOLIVAR 15CM	
MA-0144	ESTILETE BIOLIVAR 18CM	
MA-0145	ESTILETE BIOLIVAR 20CM	
MA-3201	ESTILETE DE RUMEL	

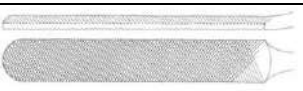
MA-1395 ^a	FACA BALLANGER BAIONETA 20CM 3MM	
MA-1395	FACA BALLANGER BAIONETA 20CM 4MM	
MA-1396	FACA BALLANGER BAIONETA 20CM 5MM	
MA-1397A	FACA BALLANGER RETA 19CM 3MM	
MA-1397	FACA BALLANGER RETA 19CM 4MM	
MA-1398	FACA BALLANGER RETA 19CM 5MM	
MA-4768A	FACA BECKMANN Nº01 22CM	
MA-4768B	FACA BECKMANN Nº02 22CM	
MA-4768C	FACA BECKMANN Nº03 22CM	
MA-4768D	FACA BECKMANN Nº04 22CM	
MA-4768E	FACA BECKMANN Nº05 22CM	
MA-4768F	FACA BECKMANN Nº06 22CM	
MA-7066	FACA CATLIN	
MA-6641	FACA COLLIN	
MA-1406	FACA DE ARACNÓIDE 20CM	
MA-1904	FACA LEBSCH	
MA-3817	FIO DE KIRSCHNER 1,0MM	
MA-3817A	FIO DE KIRSCHNER 1,5MM	
MA-3817B	FIO DE KIRSCHNER 2,0MM	
MA-3817C	FIO DE KIRSCHNER 2,5MM	
MA-3817D	FIO DE KIRSCHNER 3,0MM	
MA-5782	FIO DE STEINMANN 1,0MM	
MA-9030	FORMÃO LAMBOTTE CURVO 24CM X 12,7MM	
MA-9025	FORMÃO LAMBOTTE CURVO 24CM X 19,0MM	
MA-9026	FORMÃO LAMBOTTE CURVO 24CM X 25,0MM	
MA-9029	FORMÃO LAMBOTTE CURVO 24CM X 32,0MM	
MA-9027	FORMÃO LAMBOTTE CURVO 24CM X 38,0MM	
MA-9028	FORMÃO LAMBOTTE CURVO 24CM X 6,4MM	
MA-6122	FORMÃO LAMBOTTE RETO 24CM X 12,7MM	
MA-9031	FORMÃO LAMBOTTE RETO 24CM X 19,0MM	
MA-9032	FORMÃO LAMBOTTE RETO 24CM X 25,0MM	
MA-9033	FORMÃO LAMBOTTE RETO 24CM X 32,0MM	
MA-9034	FORMÃO LAMBOTTE RETO 24CM X 38,0MM	
MA-9035	FORMÃO LAMBOTTE RETO 24CM X 6,4MM	

MA-1016	FRESA D'ERRICO	
MA-1003	FRESA HUDSON OVAL 09MM	
MA-1004	FRESA HUDSON OVAL 13MM	
MA-1005	FRESA HUDSON REDONDA 14MM	
MA-1006	FRESA HUDSON REDONDA 16MM	
MA-1007	FRESA HUDSON REDONDA 18MM	
MA-1008	FRESA HUDSON REDONDA 20MM	
MA-1009	FRESA HUDSON REDONDA 22MM	
MA-1001	FRESA LISA CUSHING 09MM	
MA-1002	FRESA LISA CUSHING 13MM	
MA-1002A	FRESA LISA CUSHING 16MM	
MA-1010	FRESA MCKENZIE 13MM	
MA-3821	GANCHÃO LONGO	
MA-3818	GANCHINHO LONGO	
MA-4173	GANCHO ADSON P/ NERVOS 19CM PONTA AGUDA	
MA-2341	GANCHO ADSON P/ NERVOS 19CM PONTA ROMBA	
MA-5207	GANCHO BARROS	
MA-6972	GANCHO BERGMANN P/ TRAQUÉIA 14CM PONTA 7MM	
MA-6857	GANCHO C/ MOLA	
MA-2481	GANCHO C/ MOLA E CLAMP BULLDOG 24CM	
MA-2055	GANCHO C/ MOLA JOGO DE 06 PEÇAS (4 DE 20CM E 2 DE 16CM)	
MA-2831	GANCHO CASPAR EXPLORADOR 45° 245MM PONTA 3,5MM	
MA-2830	GANCHO CASPAR EXPLORADOR 90° 245MM PONTA 4MM	
MA-2830A	GANCHO CASPAR EXPLORADOR 90° 245MM PONTA 6MM	
MA-2830B	GANCHO CASPAR EXPLORADOR 90° 245MM PONTA 7MM	
MA-6442	GANCHO COLLINS 25MM X 23CM	
MA-6756	GANCHO CRILE ROMBO PONTA DELICADA	
MA-6755	GANCHO CRILE ROMBO PONTA GROSSA	
MA-2149	GANCHO CUSHING 28CM P/ NERVOS	
MA-7074	GANCHO CUSHING 5" PONTA FINA	
MA-7076	GANCHO CUSHING 9" PONTA ROMBA	

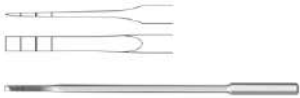
MA-1938	GANCHO EM T 18CM AGUDO PONTA 18X21MM	
MA-2342	GANCHO FRAZIER 13CM PONTA 2,5MM AGUDO	
MA-4943	GANCHO FRAZIER 13CM PONTA 2,5MM ROMBO	
MA-1407	GANCHO FRAZIER 15CM	
MA-4513	GANCHO FRAZIER 18CM	
MA-4945	GANCHO FRAZIER 19CM	
MA-4340	GANCHO FRAZIER 20CM	
MA-4942	GANCHO FRAZIER 23CM	
MA-2165	GANCHO FREER 15CM 02 DENTES AGUDOS 2,5MM	
MA-2233	GANCHO FREER 15CM 02 DENTES ROMBOS 2,5MM	
MA-2995	GANCHO GILLIES 13CM Nº01	
MA-2996	GANCHO GILLIES 13CM Nº02	
MA-3844	GANCHO GILLIES 16CM AGUDO	
MA-3845	GANCHO GILLIES 16CM ROMBO	
MA-5409	GANCHO GILLIES 18CM PONTA 2MM	
MA-5410	GANCHO GILLIES 18CM PONTA 3MM	
MA-3406	GANCHO GUTHRIE	
MA-8043	GANCHO GUTHRIE 13CM C/ 02 DENTES AGUDOS 2,5MM	
MA-6124	GANCHO JOSEPH AGUDO 16CM 01 DENTE	
MA-3645	GANCHO JOSEPH AGUDO 16CM 02 DENTES 10MM	
MA-8287	GANCHO JOSEPH AGUDO 16CM 02 DENTES 2MM	
MA-5418	GANCHO JOSEPH AGUDO 16CM 02 DENTES 5MM	
MA-3586	GANCHO JOSEPH AGUDO 16CM 02 DENTES 7MM	
MA-5062	GANCHO KRAYENBUHL	
MA-2607	GANCHO LAHEY P/ DURA	
MA-2998	GANCHO LAMBOTTE TAM. 27CM	
MA-9969	GANCHO LANDOLT BAIONETA ROMBO 260MM	
MA-2999	GANCHO LANE 10MM X 19CM	
MA-1416A	GANCHO MALLIS 19CM 90° PONTA 10MM	
MA-1417A	GANCHO MALLIS 19CM 90° PONTA 8MM	
MA-1419	GANCHO MALLIS 19CM CURVO AGUDO	
MA-1418	GANCHO MALLIS 19CM CURVO ROMBO	
MA-1416	GANCHO MALLIS 19CM RETO AGUDO	
MA-1415	GANCHO MALLIS 19CM RETO C/ BOLA	
MA-1417	GANCHO MALLIS 19CM RETO ROMBO	

MA-1986	GANCHO MITRAL P/ SIMPARECTOMIA	
MA-1505S	GANCHO P/ AFASTADOR LOMBAR 4 DENTES HASTE ÚTIL 40MM	
MA-1505T	GANCHO P/ AFASTADOR LOMBAR 6 DENTES HASTE ÚTIL 60MM	
MA-1233	GANCHO P/ AFASTADOR SCOVILLE 38MM	
MA-1232	GANCHO P/ AFASTADOR SCOVILLE 51MM	
MA-1233A	GANCHO P/ AFASTADOR SCOVILLE 51MM	
MA-3869	GANCHO P/ AFASTADOR SCOVILLE 61MM	
MA-1233B	GANCHO P/ AFASTADOR SCOVILLE 70MM	
MA-1232A	GANCHO P/ AFASTADOR SCOVILLE 76MM	
MA-1971	GANCHO SACHS 153MM P/ DURA MATER	
MA-1433	GANCHO SMITHWICK 20CM	
MA-1432	GANCHO SMITHWICK 30CM	
MA-2558	GANCHO VOLKMAN AGUDO 20CM PONTA 19X27MM	
MA-2559	GANCHO VOLKMAN AGUDO 23CM PONTA 15X20MM	
MA-5417	GANCHO VOLKMAN AGUDO 25CM PONTA 15X20MM	
MA-5760	GANCHO VOLKMAN ROMBO 23CM PONTA 15X20MM	
MA-1796	GANHO C/ MOLA C/ CLAMP BULLDOG	
MA-8118C	GOIVA ALEXANDER 18CM X 10MM	
MA-8118D	GOIVA ALEXANDER 18CM X 12MM	
MA-8118E	GOIVA ALEXANDER 18CM X 14MM	
MA-8118	GOIVA ALEXANDER 18CM X 4MM	
MA-8118A	GOIVA ALEXANDER 18CM X 6MM	
MA-8118B	GOIVA ALEXANDER 18CM X 8MM	
MA-5088	GOIVA CAPENER BAIONETA 24CM X 10MM	
MA-5089	GOIVA CAPENER BAIONETA 24CM X 15MM	
MA-5093	GOIVA CAPENER BAIONETA 24CM X 20MM	
MA-6953	GOIVA CAPENER BAIONETA 24CM X 25MM	
MA-6951	GOIVA CAPENER BAIONETA 24CM X 5MM	
MA-1604B	GOIVA COBB CANALETA 28CM CURVA 4MM	
MA-1848B	GOIVA COBB CANALETA 28CM CURVA 7MM	
MA-1604C	GOIVA COBB CANALETA 28CM CURVA P/ TRÁS 4MM	
MA-1848C	GOIVA COBB CANALETA 28CM CURVA P/ TRÁS 7MM	
MA-1604	GOIVA COBB CANALETA 28CM RETA 4MM	
MA-1848	GOIVA COBB CANALETA 28CM RETA 7MM	
MA-1604A	GOIVA COBB CANALETA 28CM SEMI-CURVA 4MM	
MA-1848A	GOIVA COBB CANALETA 28CM SEMI-CURVA 7MM	
MA-2015	GOIVA HIBBS CURVA 22CM X 10MM	
MA-2015A	GOIVA HIBBS CURVA 22CM X 13MM	
MA-2015B	GOIVA HIBBS CURVA 22CM X 16MM	
MA-2015C	GOIVA HIBBS CURVA 22CM X 19MM	
MA-2015D	GOIVA HIBBS CURVA 22CM X 25MM	
MA-2015E	GOIVA HIBBS CURVA 22CM X 28MM	

MA-6491	GOIVA HIBBS P/ ENDOSCOPIA 47CM X 7MM	
MA-3605	GOIVA HIBBS RETA 22CM X 10MM	
MA-3605A	GOIVA HIBBS RETA 22CM X 13MM	
MA-3605B	GOIVA HIBBS RETA 22CM X 16MM	
MA-3605C	GOIVA HIBBS RETA 22CM X 19MM	
MA-3605D	GOIVA HIBBS RETA 22CM X 25MM	
MA-3605E	GOIVA HIBBS RETA 22CM X 28MM	
MA-6629A	GOIVA LEXER 22CM X 10MM	
MA-6629B	GOIVA LEXER 22CM X 12MM	
MA-6629C	GOIVA LEXER 22CM X 15MM	
MA-6629D	GOIVA LEXER 22CM X 20MM	
MA-6629E	GOIVA LEXER 22CM X 25MM	
MA-6629F	GOIVA LEXER 22CM X 30MM	
MA-6629	GOIVA LEXER 22CM X 7MM	
MA-6699B	GOIVA LEXER 25CM CURVA 10MM	
MA-6599	GOIVA LEXER 25CM CURVA 15MM	
MA-6599A	GOIVA LEXER 25CM CURVA 5MM	
MA-6628B	GOIVA LEXER 25CM RETA 10MM	
MA-6628	GOIVA LEXER 25CM RETA 15MM	
MA-6628A	GOIVA LEXER 25CM RETA 5MM	
MA-1850E	GOIVA SMITH-PETERSEN CANALETA CURVO 20CM X 14MM	
MA-1850F	GOIVA SMITH-PETERSEN CANALETA CURVO 20CM X 19MM	
MA-1850G	GOIVA SMITH-PETERSEN CANALETA CURVO 20CM X 25MM	
MA-1850D	GOIVA SMITH-PETERSEN CANALETA CURVO 20CM X 9MM	
MA-1850A	GOIVA SMITH-PETERSEN CANALETA RETO 20CM X 14MM	
MA-1850B	GOIVA SMITH-PETERSEN CANALETA RETO 20CM X 19MM	
MA-1850C	GOIVA SMITH-PETERSEN CANALETA RETO 20CM X 25MM	
MA-1850	GOIVA SMITH-PETERSEN CANALETA RETO 20CM X 9MM	
MA-1849	GOIVA STILLE CANALETA 19CM X 10MM	
MA-1849A	GOIVA STILLE CANALETA 19CM X 15MM	
MA-1849B	GOIVA STILLE CANALETA 19CM X 20MM	
MA-1849C	GOIVA STILLE CANALETA 19CM X 25MM	
MA-8117	GOIVA STILLE CANALETA 19CM X 5MM	
MA-2727	GOIVA SWAN NECK 23CM	
MA-8113	GOIVA U. S. ARMY 18CM X 12MM	
MA-8114	GOIVA U. S. ARMY 18CM X 18MM	
MA-8112	GOIVA U. S. ARMY 18CM X 6MM	

MA-7079A	JOGO DE CURETAS SIMON ANG. FIG. (0000/000/00/0/1/2/3/4/5/6)	
MA-7079	JOGO DE CURETAS SIMON RETA FIG. (0000/000/00/0/1/2/3/4/5/6)	
MA-5998	JOGO DE CURETAS VOLKMANN FIG. (0000/000/00/0/1/2/3/4/5/6)	
MA-6659	JOGO DE OSTEÓTOMO HOKE P/ MÃO (JOGO C/ 5 PEÇAS)	
MA-4625	LIMA P/ OSSO 25CM	
MA-4792	LIMA P/ OSSO 28CM	
MA-4422	LIMA P/ OSSO BAIONETA 24CM	
MA-4624	LIMA P/ OSSO E RASPA 220MM	
MA-5170	LIMA P/ OSSO MILLER	
MA-5165	LIMA P/ OSSO SELDIN	
MA-2677A	MICRO BISTURI YASARGIL BAIONETA 19CM CORTE P/ BAIXO	
MA-2677	MICRO BISTURI YASARGIL BAIONETA 19CM CORTE P/ CIMA	
MA-1435	MICRO CORTADOR KOOS BAION. 19CM AGUDO CORTE P/ BAIXO	
MA-1434	MICRO CORTADOR KOOS BAION. 19CM AGUDO CORTE P/ CIMA	
MA-1437	MICRO CORTADOR KOOS BAION. 19CM ROMBO CORTE P/ BAIXO	
MA-1436	MICRO CORTADOR KOOS BAION. 19CM ROMBO CORTE P/ CIMA	
MA-2539	MICRO CURETA YASARGIL BAIONETA 19CM RETA FIG. 0000	
MA-1429	MICRO DISSECTOR ADSON RETO 20CM	
MA-1426	MICRO DISSECTOR DANDY 22CM ANG. DIREITA	
MA-1426A	MICRO DISSECTOR DANDY 22CM ANG. ESQUERDA	
MA-1425	MICRO DISSECTOR DANDY RETO 22CM	
MA-1427	MICRO DISSECTOR HOEN 23CM RETO GANCHO 7MM	
MA-1428	MICRO DISSECTOR HOEN ANG. DIREITA	
MA-1428A	MICRO DISSECTOR HOEN ANG. ESQUERDA	
MA-1423	MICRO DISSECTOR ROTHON (C/ 14 UNID.)	

MA-1438	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA (C/ 14 UNID.)	
MA-1438A	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°01	
MA-1438B	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°02	
MA-1438C	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°03	
MA-1438D	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°04	
MA-1438E	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°05	
MA-1438F	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°06	
MA-1438G	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°07	
MA-1438H	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°08	
MA-1438I	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°09	
MA-1438J	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°10	
MA-1438K	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°11	
MA-1438L	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°12	
MA-1438M	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°13	
MA-1438N	MICRO DISSECTOR ROTHON BAIONETA 25CM N°14	
MA-1423A	MICRO DISSECTOR ROTHON N°01	
MA-1423B	MICRO DISSECTOR ROTHON N°02	
MA-1423C	MICRO DISSECTOR ROTHON N°03	
MA-1423D	MICRO DISSECTOR ROTHON N°04	
MA-1423E	MICRO DISSECTOR ROTHON N°05	
MA-1423F	MICRO DISSECTOR ROTHON N°06	
MA-1423G	MICRO DISSECTOR ROTHON N°07	
MA-1423H	MICRO DISSECTOR ROTHON N°08	
MA-1423I	MICRO DISSECTOR ROTHON N°09	
MA-1423J	MICRO DISSECTOR ROTHON N°10	
MA-1423K	MICRO DISSECTOR ROTHON N°11	
MA-1423L	MICRO DISSECTOR ROTHON N°12	
MA-1423M	MICRO DISSECTOR ROTHON N°13	
MA-1423N	MICRO DISSECTOR ROTHON N°14	
MA-1430	MICRO GANCHO CUSHING AGUDO	
MA-1431	MICRO GANCHO CUSHING ROMBO	
MA-1420	MICRO RUGINA YASARGIL 20CM CURVO AGUDO	
MA-6870	OSTEÓTOMO CHAMPIONNIERE 40MMX20CM	
MA-1846H	OSTEÓTOMO COBB CURVO 28CM X 13MM	
MA-1846I	OSTEÓTOMO COBB CURVO 28CM X 16MM	
MA-1846J	OSTEÓTOMO COBB CURVO 28CM X 19MM	
MA-1846K	OSTEÓTOMO COBB CURVO 28CM X 25MM	
MA-3323	OSTEÓTOMO COBB CURVO 28CM X 4MM	
MA-1846F	OSTEÓTOMO COBB CURVO 28CM X 6MM	
MA-1846G	OSTEÓTOMO COBB CURVO 28CM X 9MM	
MA-1846B	OSTEÓTOMO COBB RETO 28CM X 13MM	
MA-1846C	OSTEÓTOMO COBB RETO 28CM X 16MM	
MA-1846D	OSTEÓTOMO COBB RETO 28CM X 19MM	
MA-1846E	OSTEÓTOMO COBB RETO 28CM X 25MM	
MA-3324	OSTEÓTOMO COBB RETO 28CM X 4MM	
MA-1846	OSTEÓTOMO COBB RETO 28CM X 6MM	
MA-1846A	OSTEÓTOMO COBB RETO 28CM X 9MM	

MA-3605L	OSTEÓTOMO GOIVA HIBBS RETA 23CM X 32MM	
MA-3491	OSTEÓTOMO HIBBS 22X10MM CURVO	
MA-3498	OSTEÓTOMO HIBBS 22X10MM RETO	
MA-3493	OSTEÓTOMO HIBBS 22X13MM CURVO	
MA-3501	OSTEÓTOMO HIBBS 22X13MM RETO	
MA-3494	OSTEÓTOMO HIBBS 22X16MM CURVO	
MA-3502	OSTEÓTOMO HIBBS 22X16MM RETO	
MA-3495	OSTEÓTOMO HIBBS 22X19MM CURVO	
MA-3503	OSTEÓTOMO HIBBS 22X19MM RETO	
MA-3496	OSTEÓTOMO HIBBS 22X25MM CURVO	
MA-3504	OSTEÓTOMO HIBBS 22X25MM RETO	
MA-3497	OSTEÓTOMO HIBBS 22X28MM CURVO	
MA-3505	OSTEÓTOMO HIBBS 22X28MM RETO	
MA-6490	OSTEÓTOMO HIBBS P/ ENDOSCOPIA 47CM X 10MM	
MA-6443	OSTEÓTOMO HOKE 13CM X 03MM	
MA-6443A	OSTEÓTOMO HOKE 13CM X 04MM	
MA-6443B	OSTEÓTOMO HOKE 13CM X 06MM	
MA-6443C	OSTEÓTOMO HOKE 13CM X 08MM	
MA-6443D	OSTEÓTOMO HOKE 13CM X 10MM	
MA-6443E	OSTEÓTOMO HOKE 13CM X 13MM	
MA-6443F	OSTEÓTOMO HOKE 13CM X 16MM	
MA-6443G	OSTEÓTOMO HOKE 13CM X 19MM	
MA-3980	OSTEÓTOMO HOKE DELICADO P/ MÃO 150X3,2MM	
MA-3981	OSTEÓTOMO HOKE DELICADO P/ MÃO 150X4,8MM	
MA-3982	OSTEÓTOMO HOKE DELICADO P/ MÃO 150X6,4MM	
MA-3983	OSTEÓTOMO HOKE DELICADO P/ MÃO 150X8,0MM	
MA-3985	OSTEÓTOMO HOKE DELICADO P/ MÃO 150X9,5MM	

MA-3315	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 24CM 06MM	
MA-3316	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 24CM 08MM	
MA-3318	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 24CM 10MM	
MA-3317	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 24CM 12MM	
MA-3319	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 24CM 15MM	
MA-3320	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 24CM 20MM	
MA-3321	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 24CM 25MM	
MA-5108	OSTEÓTOMO LAMBOTTE MINI 15CM 10X4MM	
MA-5121	OSTEÓTOMO LAMBOTTE MINI 15CM 12X4MM	
MA-5122	OSTEÓTOMO LAMBOTTE MINI 15CM 15X4MM	
MA-5124	OSTEÓTOMO LAMBOTTE MINI 15CM 4X4MM	
MA-5124A	OSTEÓTOMO LAMBOTTE MINI 15CM 6X4MM	
MA-5123	OSTEÓTOMO LAMBOTTE MINI 15CM 8X4MM	
MA-3334A	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 15MM TAM. 23CM 5MM ESPESSURA	
MA-3335B	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 20MM TAM. 24CM 5MM ESPESSURA	
MA-3335C	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 22MM TAM. 23CM 5MM ESPESSURA	
MA-3332	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 24CM 06MM	
MA-3337	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 24CM 08MM	
MA-3338	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 24CM 10MM	
MA-3333	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 24CM 12MM	
MA-3334	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 24CM 15MM	
MA-3335	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 24CM 20MM	
MA-3335A	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 24CM 22MM	
MA-3336	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 24CM 25MM	
MA-3332A	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 25MM TAM. 23CM 5MM ESPESSURA	
MA-3327	OSTEÓTOMO SHEEHAN RETO 16CM 02MM	
MA-3328	OSTEÓTOMO SHEEHAN RETO 16CM 04MM	
MA-3329	OSTEÓTOMO SHEEHAN RETO 16CM 06MM	
MA-3330	OSTEÓTOMO SHEEHAN RETO 16CM 08MM	
MA-3331	OSTEÓTOMO SHEEHAN RETO 16CM 10MM	
MA-2367	OSTEÓTOMO SHEEHAN RETO 16CM 12MM	
MA-3325	OSTEÓTOMO SHEEHAN RETO 16CM 15MM	
MA-1047F	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN CURVO 24CM X 06MM	
MA-1047G	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN CURVO 24CM X 09MM	
MA-1047H	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN CURVO 24CM X 13MM	
MA-1047I	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN CURVO 24CM X 16MM	
MA-1047J	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN CURVO 24CM X 19MM	
MA-1047K	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN CURVO 24CM X 25MM	
MA-1047B	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN RETO 24CM X 13MM	
MA-1047C	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN RETO 24CM X 16MM	
MA-1047D	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN RETO 24CM X 19MM	
MA-1047E	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN RETO 24CM X 25MM	
MA-1047	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN RETO 24CM X 6MM	
MA-1047A	OSTEÓTOMO SMITH-PETERSEN RETO 24CM X 9MM	

MA-2692	OSTEÓTOMO STILLE CURVO 20CM 06MM	
MA-5787	OSTEÓTOMO STILLE CURVO 20CM 08MM	
MA-9038	OSTEÓTOMO STILLE CURVO 20CM 10MM	
MA-3322	OSTEÓTOMO STILLE CURVO 20CM 12MM	
MA-9040	OSTEÓTOMO STILLE CURVO 20CM 14MM	
MA-2966	OSTEÓTOMO STILLE CURVO 20CM 15MM	
MA-9041	OSTEÓTOMO STILLE CURVO 20CM 18MM	
MA-9042	OSTEÓTOMO STILLE CURVO 20CM 20MM	
MA-5793	OSTEOTOMO STILLE CURVO 20CM 22MM	
MA-5804	OSTEÓTOMO STILLE CURVO 20CM 25MM	
MA-2924	OSTEÓTOMO STILLE RETO 20CM 06MM	
MA-2926	OSTEÓTOMO STILLE RETO 20CM 08MM	
MA-1606	OSTEÓTOMO STILLE RETO 20CM 10MM	
MA-3575	OSTEÓTOMO STILLE RETO 20CM 12MM	
MA-1607	OSTEÓTOMO STILLE RETO 20CM 14MM	
MA-5788	OSTEÓTOMO STILLE RETO 20CM 15MM	
MA-9046	OSTEOTOMO STILLE RETO 20CM 18MM	
MA-1608	OSTEOTOMO STILLE RETO 20CM 20MM	
MA-3576	OSTEOTOMO STILLE RETO 20CM 22MM	
MA-2927	OSTEÓTOMO STILLE RETO 20CM 25MM	
MA-2928	OSTEÓTOMO STILLE RETO 20CM 30MM	
MA-2016	OSTEOTOMO U. S. ARMY 18CM X 06MM	
MA-2017	OSTEOTOMO U. S. ARMY 18CM X 12MM	
MA-2018	OSTEOTOMO U. S. ARMY 18CM X 18MM	
MA-3837	OSTEOTOMO WEST 16CM X 04MM	
MA-3835	OSTEOTOMO WEST 18CM X 03MM	
MA-4072	PERFURADOR ÓSSEO P/ PENETRAÇÃO NO OMBRO 23,5CM	
MA-6111	PERFURADOR ÓSSEO PONTA ANATÔMICA 16CM	
MA-3341	PERFURADOR PERTHES TAM. 21CM	
MA-1101	PINÇA ADSON P/ TUMOR BAIONETA 21CM CURVA	
MA-1100	PINÇA ADSON P/ TUMOR BAIONETA 21CM RETA	
MA-4455	PINÇA ADSON P/ TUMOR BAIONETA 24CM CURVA	
MA-4454	PINÇA ADSON P/ TUMOR BAIONETA 24CM RETA	
MA-1046	RUGINA CUSHING 20CM X 13MM	
MA-1046A	RUGINA CUSHING 20CM X 15MM	
MA-5138	RUGINA DAVIDSON ALEXANDER 29CM	
MA-1928	RUGINA FARABEUF CURVA 15CM X 12,5MM	
MA-1928A	RUGINA FARABEUF RETA 15CM X 12,5MM	

MA-1045E	RUGINA LAMBOTTE CURVA 17CM 20MM	
MA-1045F	RUGINA LAMBOTTE CURVA 18CM 10MM	
MA-1045	RUGINA LAMBOTTE CURVA 21CM 05MM	
MA-1045A	RUGINA LAMBOTTE CURVA 21CM 10MM	
MA-1045B	RUGINA LAMBOTTE CURVA 21CM 15MM	
MA-1045C	RUGINA LAMBOTTE CURVA 21CM 20MM	
MA-1045D	RUGINA LAMBOTTE CURVA 21CM 25MM	
MA-1389A	RUGINA NICOLA CORTANTE 21,5CM DIREITA	
MA-1389B	RUGINA NICOLA CORTANTE 21,5CM ESQUERDA	
MA-1389	RUGINA NICOLA CORTANTE 21,5CM RETA	
MA-6454	RUGINA ROBERT JONES 18CM PONTA 25MM	
MA-6456	RUGINA ROBERT JONES 22CM PONTA 25MM	
MA-1026	SERRA DE GIGLI 30CM	
MA-1026A	SERRA DE GIGLI 40CM	
MA-1026B	SERRA DE GIGLI 50CM	
MA-1026D	SERRA DE GIGLI 60CM	
MA-1026C	SERRA DE GIGLI 70CM	
MA-1011	TREFINA D'ERRICO 25MM	
MA-1011A	TREFINA D'ERRICO 35MM	
MA-1011B	TREFINA D'ERRICO 50MM	

Orientações sobre o uso do produto

O instrumental cirúrgico deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, e dessa forma, cabe ao cirurgião a escolha do método a ser empregado, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

Os Instrumentais Cirúrgicos Não Articulados Cortantes Macom são fornecidos na condição montado, pronto para uso. Produto não estéril, devendo ser esterilizado, obrigatoriamente, antes de sua utilização.

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais sobre o uso do produto:

Na utilização:

O instrumental cirúrgico deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

Produto **não estéril**, devendo ser esterilizado, **obrigatoriamente**, antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentais cirúrgicos.

Verifique sempre a data de vencimento da esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Retire o produto da embalagem somente no momento da utilização.

Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado, a fim de evitar o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. Os procedimentos de limpeza e esterilização devem ter uma padronização adequada, a fim de evitar a disseminação de contaminação e danos ao instrumental.

O instrumental utilizado nas cirurgias devem ser limpo e esterilizado após cada procedimento cirúrgico. Após a esterilização o instrumental deve ser armazenado em embalagem não violável, seguindo os cuidados básicos de armazenamento.

No transporte e armazenamento:

O instrumental cirúrgico deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem o instrumental deve atender às seguintes exigências: o instrumental deve estar limpo, seco e embalado; deve ser armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 20 e 25°C e umidade relativa do ar entre 30 e 50%), isento de contaminação particulada; e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular o instrumental cirúrgico cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Na Limpeza e Conservação:

Para garantir uma melhor conservação deste produto deve-se utilizar nosso *Guia para Conservação, Limpeza e Esterilização de Instrumentais Cirúrgicos*, que contém orientações relativas aos cuidados necessários com o instrumental cirúrgico, tornando melhor o seu custo benefício e mantendo a performance dos mesmos.

É necessário que as instruções de limpeza sejam corretamente seguidas.

É recomendado quando do recebimento inicial do produto e sempre que o produto estiver fora de uso (a cada 15 dias), ou ainda conforme procedimentos da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH.

Este produto precisa ser submetido ao processo de limpeza o mais imediato possível após sua utilização, a fim de evitar incrustações.

Não utilize produtos químicos, desinfetantes à base de cloro e/ou abrasivos, ou hipoclorito de sódio para evitar riscos de corrosão ou manchas.

Para conservação, mantenha o produto limpo, desinfetado, lubrificado e acondicionado, disponível para sua pronta utilização.

Na Esterilização:

Antes da esterilização os instrumentais cirúrgicos devem ser limpos, lavados, enxaguados abundantemente e secados para posterior esterilização.

Como procedimento auxiliar de limpeza e esterilização pode-se utilizar detergente enzimático, **com posterior enxágue em água e secagem. Não deixar o instrumental imerso em qualquer substância líquida.**

Nunca ultrapasse a temperatura máxima de 135°C para proceder à esterilização.

Na Lubrificação:

Após a limpeza e esterilização das partes e peças deste produto deve-se, primeiramente secar bem todas as partes e acessórios, e posteriormente lubrificar o produto, principalmente suas articulações.

O uso de óleos a base de petróleo (vaselina, silicone, lubrificantes, aerossóis,...) devem ser evitados, pois atacam os materiais deste produto. Lubrificantes minerais, não oleosos, podem ser aplicados, protegendo-o de oxidação e mantendo maleável durante sua utilização.

O processo de lubrificação deve ocorrer sempre que o produto for utilizado.



Na manutenção:

A função e a segurança dos produtos Macom somente são garantidas se os serviços de manutenção e reparos forem realizados pela Assistência Técnica Macom.

A Macom não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com conseqüências ao paciente em função de manutenções impróprias, não efetuadas pela nossa Assistência Técnica.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.

Para todo tipo de manutenção, dentro ou fora da garantia, procure sempre a Assistência Técnica autorizada Macom. Não deixe que terceiros, sem qualificação técnica adequada, venha a danificar ou mudar as características originais do seu produto.

Garantia e Assistência Técnica

- ◆ Como todos os instrumentais cirúrgicos marca Macom®, este também recebe garantia total de 10 (dez) anos contra possíveis defeitos de fabricação, exceto uso indevido.
- ◆ Para todo tipo de manutenção, dentro ou fora da garantia, procure sempre a Assistência Técnica autorizada Macom. Não deixe que terceiros, sem qualificação técnica adequada, venha a danificar ou mudar as características originais do seu instrumental.
- ◆ Fabricado por:
Macom Instrumental Cirúrgico Indústria Ltda.
CNPJ: 59.650.556/0001-76
Av. Um, 572 - Pq. Industrial Ferreira Fernandes
CEP 07174-000 - Guarulhos - SP
Fone/Fax: +55 11 2431-4636
site: www.macominstrumental.com.br
e-mail: macom@macominstrumental.com.br
- ◆ Registro ANVISA nº 10243070033
- ◆ Responsável Técnico
Eng. Alexandre Emiliano Muniz
CREA-SP 5062354150

Rev. 2
Data: 05/08/10