

1. Introdução

Os Instrumentais Cirúrgicos Articulados Cortantes Macom são produtos para saúde utilizados **em intervenção e apoio cirúrgico, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais**. A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

2. Especificações e características técnicas

Os Instrumentais Cirúrgicos Articulados Cortantes Macom são fabricados em aço inoxidável AISI 420, de acordo com a norma ANBT NBR ISO 7153-1.

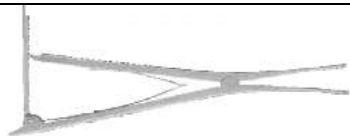
Família de instrumentais que apresenta articulação, além de corte em sua ponta, possui diversos tamanhos e diferentes formas, os quais definem o tipo e o código do produto.

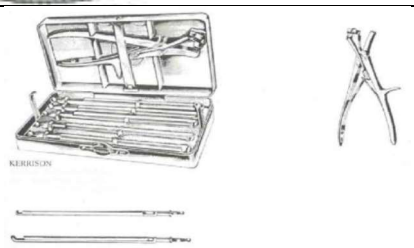
Os Instrumentais Cirúrgicos Articulados Cortantes Macom são fornecidos na condição montado, pronto para uso. Produto não estéril, devendo ser esterilizado, obrigatoriamente, antes de sua utilização.

3. Registro ANVISA nº 10243070034

4. Modelo Comercial

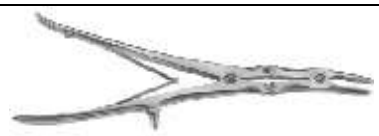
MODELO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	IMAGEM
MA-E018	ALICATE 2 EM 1 REF.18	
MA-E023	ALICATE 2 EM 1 REF.23 / M-01-009	
MA-1893	ALICATE BERNARDÃO 50CM EM AÇO INOX	
MA-2360A	ALICATE BERNARDINHO 22CM EM AÇO INOX	
MA-2360	ALICATE BERNARDINHO 36,5CM EM AÇO INOX	
MA-170	ALICATE BICO FINO 18CM EM AÇO INOX	
MA-170A	ALICATE BICO MEIA CANA 15CM EM AÇO INOX	
MA-E017	ALICATE COMPRESSOR P/ CILINDRO GAIOLA EXP. REF.17	
MA-E003	ALICATE COMPRESSOR REF.3 / M-01-012	
MA-3790	ALICATE COMUM 15CM	
MA-3791	ALICATE COMUM 21CM	
MA-6323	ALICATE CORTA E SEGURA 16CM	
MA-8050	ALICATE CORTADOR DE FIO CORTE LATERAL SIMPLES 15CM	

MA-8963	ALICATE DE CRANIOFIX	
MA-6268	ALICATE DE PRESSÃO 20CM INOX	
MA-E015	ALICATE DISTRATOR POSTERIOR REF.15	
MA-E006	ALICATE DISTRATOR REF.6 / M-01-017	
MA-3200	ALICATE DUPLA ARTICULAÇÃO P/ FIO DE AÇO 20CM	
MA-3200A	ALICATE DUPLA ARTICULAÇÃO P/ FIO DE AÇO 22CM	
MA-E004	ALICATE LISTESE REF.4	
MA-1922	ALICATE UNIVERSAL EM AÇO INOX	
MA-2364	CIZALHA LISTON 14CM RETA	
MA-2364D	CIZALHA LISTON 17CM CURVA	
MA-2364A	CIZALHA LISTON 17CM RETA	
MA-2364E	CIZALHA LISTON 20CM CURVA	
MA-2364B	CIZALHA LISTON 20CM RETA	
MA-2364F	CIZALHA LISTON 22CM CURVA	
MA-2364C	CIZALHA LISTON 22CM RETA	
MA-2364G	CIZALHA LISTON BIARTICULADA ANGULADA 24CM	
MA-2364J	CIZALHA LISTON BIARTICULADA CURVA 28CM	
MA-2364H	CIZALHA LISTON BIARTICULADA RETA 28CM	
MA-1254	CIZALHA LISTON-HORSLEY 28CM	
MA-1901	CIZALHA LISTON-KEY-HORSLEY 25,5CM	
MA-2364I	CIZALHA LISTON-STILLE 27CM	

MA-1266	CIZALHA RUSKIN-LISTON 19CM CURVA	
MA-1266A	CIZALHA RUSKIN-LISTON 19CM RETA	
MA-1294	CONJUNTO KERRISON UNIVERSAL C/ 04 HASTES	
MA-1253	CORTADOR DE VILBSS	
MA-5184	COSTOTOMO SAUERBRUCH 24CM	
MA-5987	COSTOTOMO BETHUNE ANGULADO 34CM	
MA-2716	COSTOTOMO COLLIN 19,5CM	
MA-7882	COSTOTOMO CORYLLOS-BETHUNE 35,5CM DIREITA	
MA-7883	COSTOTOMO CORYLLOS-BETHUNE 35,5CM ESQUERDA	
MA-7881	COSTOTOMO DE ROOS 30CM	
MA-8078	COSTOTOMO GIERTZ-STILLE 25CM	
MA-2278	COSTOTOMO GLUCK 19CM	
MA-2279	COSTOTOMO SAUERBRUCH 27CM	
MA-5332	MICRO TESOURA BARRAQUER 14CM PONTA CURVA AGUDA	
MA-5331	MICRO TESOURA BARRAQUER 14CM PONTA RETA AGUDA	

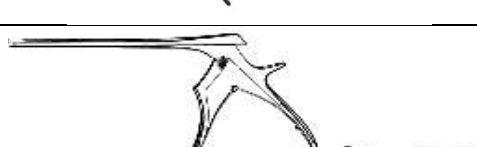
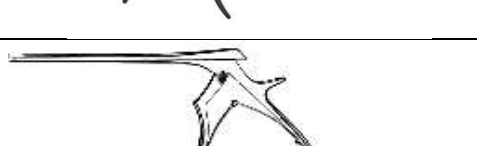
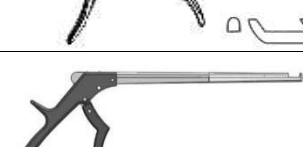
MA-1472	MICRO TESOURA JACOBSON RETA 16CM PONTA CURVA	
MA-1470	MICRO TESOURA JACOBSON RETA 16CM PONTA RETA	
MA-1473	MICRO TESOURA JACOBSON RETA 18CM PONTA CURVA	
MA-1471	MICRO TESOURA JACOBSON RETA 18CM PONTA RETA	
MA-2253	MICRO TESOURA MALIS BAIONETA 24CM PONTA CV P/ DIREITA	
MA-2253A	MICRO TESOURA MALIS BAIONETA 24CM PONTA CV P/ ESQUERDA	
MA-2253B	MICRO TESOURA MALIS BAIONETA 24CM PONTA P/ RETA	
MA-1474A	MICRO TESOURA NOYES CURVA 12CM	
MA-1474	MICRO TESOURA NOYES RETA 12CM	
MA-1481A	MICRO TESOURA POTTS-YASARGIL ESQUERDA 18CM	
MA-1482A	MICRO TESOURA POTTS-YASARGIL ESQUERDA 20CM	
MA-1481	MICRO TESOURA POTTS-YASARGIL RETA 18CM	
MA-1482	MICRO TESOURA POTTS-YASARGIL RETA 20CM	
MA-1478	MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 16CM PONTA CURVA	
MA-1475	MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 16CM PONTA RETA	
MA-1479	MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 18CM PONTA CURVA	
MA-1476	MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 18CM PONTA RETA	
MA-1480	MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 20CM PONTA CURVA	
MA-1477	MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 20CM PONTA RETA	
MA-2592	MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 22CM PONTA CURVA	
MA-2591	MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 22CM PONTA RETA	
MA-2592A	MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 24CM PONTA CURVA	
MA-2591A	MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 24CM PONTA RETA	
MA-1318	PINÇA CLOWARD P/ BAIXO 18CM PONTA 3X10MM	
MA-1321	PINÇA CLOWARD P/ BAIXO 18CM PONTA 4X10MM	
MA-1318A	PINÇA CLOWARD P/ BAIXO 20CM PONTA 3X10MM	
MA-1321A	PINÇA CLOWARD P/ BAIXO 20CM PONTA 4X10MM	
MA-1318B	PINÇA CLOWARD P/ BAIXO 22CM PONTA 3X10MM	
MA-1321B	PINÇA CLOWARD P/ BAIXO 22CM PONTA 4X10MM	

MA-1317	PINÇA CLOWARD P/ CIMA 18CM PONTA 3X10MM	
MA-1320	PINÇA CLOWARD P/ CIMA 18CM PONTA 4X10MM	
MA-1317A	PINÇA CLOWARD P/ CIMA 20CM PONTA 3X10MM	
MA-1320A	PINÇA CLOWARD P/ CIMA 20CM PONTA 4X10MM	
MA-1317B	PINÇA CLOWARD P/ CIMA 22CM PONTA 3X10MM	
MA-1320B	PINÇA CLOWARD P/ CIMA 22CM PONTA 4X10MM	
MA-1316	PINÇA CLOWARD RETA 18CM PONTA 3X10MM	
MA-1319	PINÇA CLOWARD RETA 18CM PONTA 4X10MM	
MA-1316A	PINÇA CLOWARD RETA 20CM PONTA 3X10MM	
MA-1319A	PINÇA CLOWARD RETA 20CM PONTA 4X10MM	
MA-1316B	PINÇA CLOWARD RETA 22CM PONTA 3X10MM	
MA-1319B	PINÇA CLOWARD RETA 22CM PONTA 4X10MM	
MA-1293	PINÇA CLOWARD-HARPER 18CM ANG. 40° P/ CIMA 3MM	
MA-1293A	PINÇA CLOWARD-HARPER 18CM ANG. 40° P/ CIMA 5MM	
MA-1293B	PINÇA CLOWARD-HARPER 18CM RETA 90° P/ CIMA 3MM	
MA-1293C	PINÇA CLOWARD-HARPER 18CM RETA 90° P/ CIMA 5MM	
MA-3653	PINÇA FARABEUF 22CM S/ CREMALHEIRA	
MA-3996	PINÇA FARABEUF 26CM S/ CREMALHEIRA	
MA-3514B	PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 18CM S/ CREMALHEIRA	
MA-3514C	PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 19CM C/ CREMALHEIRA	
MA-3514	PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 22CM C/ CREMALHEIRA	
MA-3514A	PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 22CM S/ CREMALHEIRA	
MA-0283	PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 26CM C/ CREMALHEIRA	
MA-3515	PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 28CM C/ CREMALHEIRA	
MA-0282	PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 32CM C/ CREMALHEIRA	
MA-1267	PINÇA GOIVA ADSON 20CM	
MA-1251	PINÇA GOIVA BEYER 18CM CURVA 3MM	
MA-5352	PINÇA GOIVA BEYER 18CM RETA 3MM	

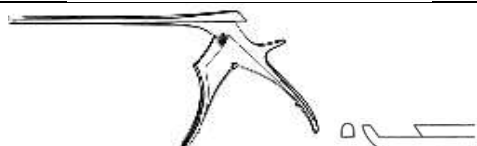
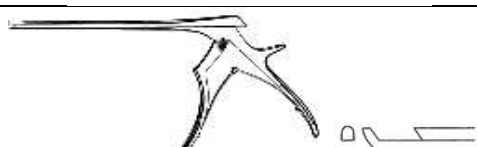
MA-1251A	PINÇA GOIVA BEYER BIARTICULADA 18CM CURVA 4MM	
MA-2507	PINÇA GOIVA BOHLER BIARTICULADA 15,5CM CURVA 3MM	
MA-2507A	PINÇA GOIVA BOHLER BIARTICULADA 15,5CM CURVA 4MM	
MA-8194B	PINÇA GOIVA DUCK BILL BIARTICULADA 23CM 2MM	
MA-8194A	PINÇA GOIVA DUCK BILL BIARTICULADA 23CM 3MM	
MA-8194	PINÇA GOIVA DUCK BILL BIARTICULADA 23CM 5MM	
MA-1255	PINÇA GOIVA ECHLIN BIARTICULADA 23CM 2MM	
MA-1256	PINÇA GOIVA ECHLIN BIARTICULADA 23CM 3MM	
MA-1257	PINÇA GOIVA ECHLIN BIARTICULADA 23CM 4MM	
MA-8193	PINÇA GOIVA ECHLIN BIARTICULADA 23CM 5MM	
MA-2516	PINÇA GOIVA HAKANSSON 17CM RETA 4MM	
MA-1262B	PINÇA GOIVA JANSEN 17,5CM CURVA 3MM	
MA-1263B	PINÇA GOIVA JANSEN 17,5CM CURVA 5MM	
MA-1262A	PINÇA GOIVA JANSEN 17,5CM RETA 3MM	
MA-1263A	PINÇA GOIVA JANSEN 17,5CM RETA 5MM	
MA-1262	PINÇA GOIVA JANSEN BIARTICULADA 18CM CURVA 3MM	
MA-1263	PINÇA GOIVA JANSEN BIARTICULADA 18CM CURVA 5MM	
MA-1260	PINÇA GOIVA LEKSELL BIARTICULADA 24CM 5MM	
MA-1261	PINÇA GOIVA LEKSELL BIARTICULADA 24CM 8MM	
MA-1259	PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE BIARTICULADA 24CM 8MM	
MA-1250A	PINÇA GOIVA LEMPert 20CM CURVA 3MM	

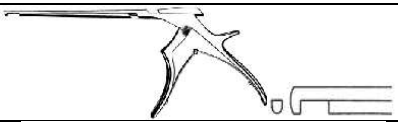
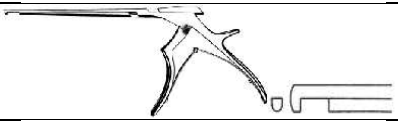
MA-1250	PINÇA GOIVA LEMPERT 20CM RETA 3MM	
MA-1269A	PINÇA GOIVA LUER 15CM CURVA 5MM	
MA-1269	PINÇA GOIVA LUER 15CM RETA 5MM	
MA-1269F	PINÇA GOIVA LUER 18CM CURVA 10MM	
MA-1269D	PINÇA GOIVA LUER 18CM CURVA 8MM	
MA-1269E	PINÇA GOIVA LUER 18CM RETA 10MM	
MA-1269C	PINÇA GOIVA LUER 18CM RETA 8MM	
MA-1269B	PINÇA GOIVA LUER SEMI-CURVA 5MM	
MA-2389	PINÇA GOIVA LUER-FRIEDMANN 14,5CM CURVA 3MM	
MA-2389A	PINÇA GOIVA LUER-FRIEDMANN 14CM CURVA 5MM	
MA-1264C	PINÇA GOIVA LUER-STILLE 26CM RETA 10MM	
MA-1264A	PINÇA GOIVA LUER-STILLE BIARTICULADA 23CM CURVA 10MM	
MA-1264B	PINÇA GOIVA LUER-STILLE BIARTICULADA 23CM CURVA 18MM	
MA-1264	PINÇA GOIVA LUER-STILLE BIARTICULADA 23CM RETA 9MM	
MA-8010	PINÇA GOIVA LUER-STILLE BIARTICULADA 27CM CURVA	
MA-1252	PINÇA GOIVA MAYFIELD BIARTICULADA 19CM CURVA 5MM	
MA-1375	PINÇA GOIVA MIDLETON - JANSEN	
MA-2506	PINÇA GOIVA OLIVERCRONA 20CM CURVA 6MM	

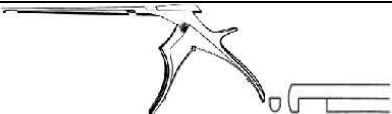
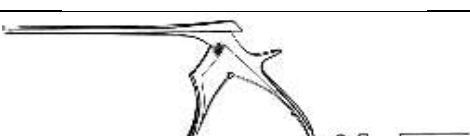
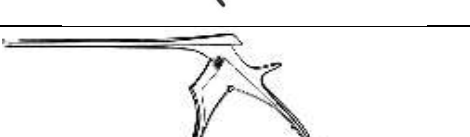
MA-2454	PINÇA GOIVA ROTTGER-RUSKIN BIARTICULADA 24CM CURVA 6MM	
MA-2455	PINÇA GOIVA RUSKIN BIARTICULADA 19CM CURVA 6MM	
MA-2455A	PINÇA GOIVA RUSKIN BIARTICULADA 24CM RETA 5MM	
MA-7884	PINÇA GOIVA SAUERBRUCH BIARTICULADA 31CM	
MA-7053	PINÇA GOIVA SEMB BIARTICULADA 24CM	
MA-4593	PINÇA GOIVA SEMB BIARTICULADA 27CM RETA	
MA-1258	PINÇA GOIVA STILLE BIARTICULADA 23CM 8MM	
MA-1268	PINÇA GOIVA STILLE LUER FIG. 01	
MA-1268A	PINÇA GOIVA STILLE LUER FIG. 02	
MA-1268B	PINÇA GOIVA STILLE LUER FIG. 03	
MA-1265	PINÇA GOIVA STILLE-RUSKIN BIARTICULADA 24CM 8MM	
MA-2605	PINÇA GOIVA SYPERT BIARTICULADA 36CM RETO 8MM	
MA-5915	PINÇA GOIVA ZAUFAL-JANSEN BIARTICULADA 18CM BC 4MM	
MA-1296	PINÇA HALEK GIRATÓRIA 4MM	

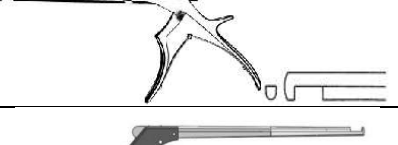
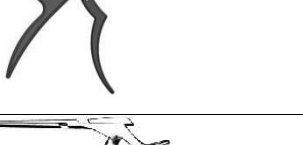
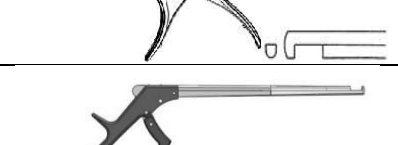
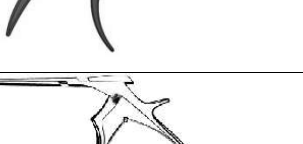
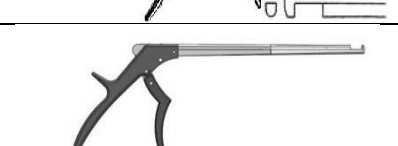
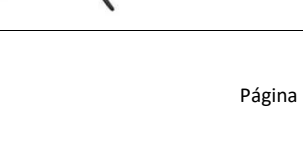
MA-1290	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 18CM P/ CIMA 1MM	
MA-1290S	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 18CM P/ CIMA 1MM SOFT LINE	
MA-1291	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 18CM P/ CIMA 2MM	
MA-1291S	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 18CM P/ CIMA 2MM SOFT LINE	
MA-1284	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 18CM P/ CIMA 3MM	
MA-1284S	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 18CM P/ CIMA 3MM SOFT LINE	
MA-2006	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 18CM P/ CIMA 4MM	
MA-2006S	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 18CM P/ CIMA 4MM SOFT LINE	
MA-1285	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 18CM P/ CIMA 5MM	
MA-1285S	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 18CM P/ CIMA 5MM SOFT LINE	

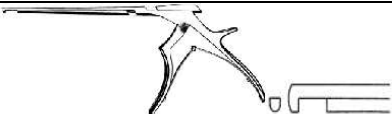
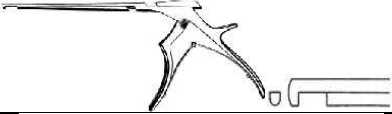
MA-1290A	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 20CM P/ CIMA 1MM	
MA-1290AS	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 20CM P/ CIMA 1MM SOFT LINE	
MA-1291A	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 20CM P/ CIMA 2MM	
MA-1291AS	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 20CM P/ CIMA 2MM SOFT LINE	
MA-1284A	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 20CM P/ CIMA 3MM	
MA-1284AS	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 20CM P/ CIMA 3MM SOFT LINE	
MA-2006A	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 20CM P/ CIMA 4MM	
MA-2006AS	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 20CM P/ CIMA 4MM SOFT LINE	
MA-1285A	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 20CM P/ CIMA 5MM	
MA-1285AS	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 20CM P/ CIMA 5MM SOFT LINE	

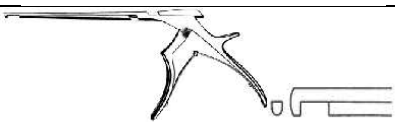
MA-1290B	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 23CM P/ CIMA 1MM	
MA-1290BS	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 23CM P/ CIMA 1MM SOFT LINE	
MA-1291B	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 23CM P/ CIMA 2MM	
MA-1291BS	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 23CM P/ CIMA 2MM SOFT LINE	
MA-1284B	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 23CM P/ CIMA 3MM	
MA-1284BS	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 23CM P/ CIMA 3MM SOFT LINE	
MA-2006B	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 23CM P/ CIMA 4MM	
MA-2006BS	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 23CM P/ CIMA 4MM SOFT LINE	
MA-1285B	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 23CM P/ CIMA 5MM	
MA-1285BS	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 23CM P/ CIMA 5MM SOFT LINE	

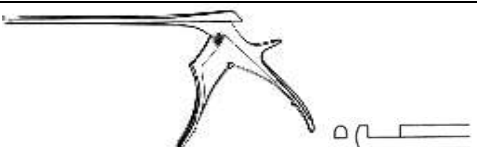
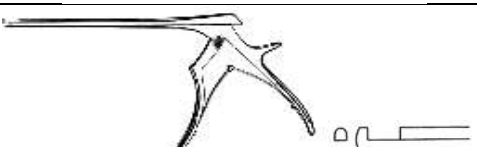
MA-1290C	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 25CM P/ CIMA 1MM	
MA-1291C	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 25CM P/ CIMA 2MM	
MA-1284C	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 25CM P/ CIMA 3MM	
MA-2006C	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 25CM P/ CIMA 4MM	
MA-1285C	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 25CM P/ CIMA 5MM	
MA-1290D	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 28CM P/ CIMA 1MM	
MA-1291D	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 28CM P/ CIMA 2MM	
MA-1284D	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 28CM P/ CIMA 3MM	
MA-2006D	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 28CM P/ CIMA 4MM	
MA-1285D	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 28CM P/ CIMA 5MM	
MA-1290E	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 30CM P/ CIMA 1MM	
MA-1291E	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 30CM P/ CIMA 2MM	
MA-1284E	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 30CM P/ CIMA 3MM	
MA-2006E	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 30CM P/ CIMA 4MM	
MA-1285E	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 30CM P/ CIMA 5MM	
MA-6558	PINÇA KERRISON BAIONETA ANG. 22CM P/ CIMA 2MM	
MA-6565	PINÇA KERRISON BAIONETA ANG. 22CM P/ CIMA 3MM	
MA-6389	PINÇA KERRISON BAIONETA ANG. 22CM P/ CIMA 4MM	
MA-6390	PINÇA KERRISON BAIONETA ANG. 22CM P/ CIMA 5MM	
MA-1288	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ BAIXO 1MM	
MA-1288S	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ BAIXO 1MM SOFT LINE	
MA-1289	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ BAIXO 2MM	
MA-1289S	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ BAIXO 2MM SOFT LINE	

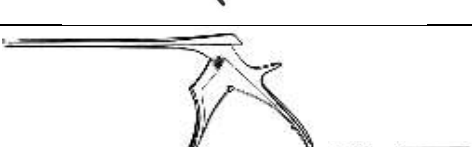
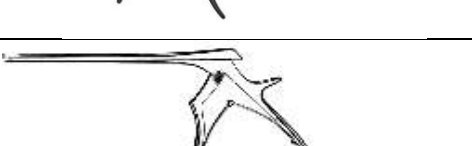
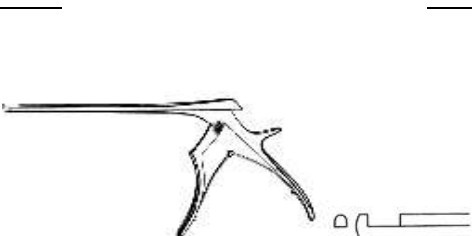
MA-1282	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ BAIXO 3MM	
MA-1282S	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ BAIXO 3MM SOFT LINE	
MA-2005	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ BAIXO 4MM	
MA-2005S	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ BAIXO 4MM SOFT LINE	
MA-1283	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ BAIXO 5MM	
MA-1283S	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ BAIXO 5MM SOFT LINE	
MA-1286	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ CIMA 1MM	
MA-1286S	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ CIMA 1MM SOFT LINE	
MA-1287	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ CIMA 2MM	
MA-1287S	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ CIMA 2MM SOFT LINE	
MA-1280	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ CIMA 3MM	

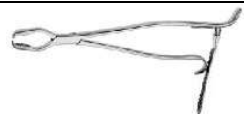
MA-1280S	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ CIMA 3MM SOFT LINE	
MA-2001	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ CIMA 4MM	
MA-2001S	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ CIMA 4MM SOFT LINE	
MA-1281	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ CIMA 5MM	
MA-1281S	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 18CM P/ CIMA 5MM SOFT LINE	
MA-1288A	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ BAIXO 1MM	
MA-1288AS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ BAIXO 1MM SOFT LINE	
MA-1289A	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ BAIXO 2MM	
MA-1289AS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ BAIXO 2MM SOFT LINE	
MA-1282A	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ BAIXO 3MM	
MA-1282AS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ BAIXO 3MM SOFT LINE	

MA-2005A	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ BAIXO 4MM	
MA-2005AS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ BAIXO 4MM SOFT LINE	
MA-1283A	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ BAIXO 5MM	
MA-1283AS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ BAIXO 5MM SOFT LINE	
MA-1288B	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ BAIXO 1MM	
MA-1288BS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ BAIXO 1MM SOFT LINE	
MA-1289B	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ BAIXO 2MM	
MA-1289BS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ BAIXO 2MM SOFT LINE	
MA-1282B	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ BAIXO 3MM	
MA-1282BS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ BAIXO 3MM SOFT LINE	
MA-2005B	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ BAIXO 4MM	

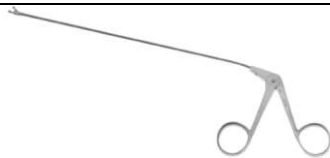
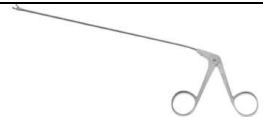
MA-2005BS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ BAIXO 4MM SOFT LINE	
MA-1283B	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ BAIXO 5MM	
MA-1288C	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 25CM P/ BAIXO 1MM	
MA-1289C	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 25CM P/ BAIXO 2MM	
MA-1282C	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 25CM P/ BAIXO 3MM	
MA-2005C	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 25CM P/ BAIXO 4MM	
MA-1283C	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 25CM P/ BAIXO 5MM	
MA-1288D	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 28CM P/ BAIXO 1MM	
MA-1289D	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 28CM P/ BAIXO 2MM	
MA-1282D	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 28CM P/ BAIXO 3MM	
MA-2005D	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 28CM P/ BAIXO 4MM	
MA-1283D	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 28CM P/ BAIXO 5MM	
MA-1286D	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 28CM P/ CIMA 1MM	
MA-1287D	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 28CM P/ CIMA 2MM	
MA-1280D	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 28CM P/ CIMA 3MM	
MA-2001D	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 28CM P/ CIMA 4MM	
MA-1281D	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 28CM P/ CIMA 5MM	
MA-1288E	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 30CM P/ BAIXO 1MM	
MA-1289E	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 30CM P/ BAIXO 2MM	
MA-1282E	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 30CM P/ BAIXO 3MM	
MA-2005E	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 30CM P/ BAIXO 4MM	
MA-1283E	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 30CM P/ BAIXO 5MM	
MA-1287E	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 30CM P/ CIMA 2MM	
MA-1280E	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 30CM P/ CIMA 3MM	
MA-2001E	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 30CM P/ CIMA 4MM	
MA-1281E	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 30CM P/ CIMA 5MM	
MA-1286A	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ CIMA 1MM	

MA-1286AS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ CIMA 1MM SOFT LINE	
MA-1287A	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ CIMA 2MM	
MA-1287AS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ CIMA 2MM SOFT LINE	
MA-1280A	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ CIMA 3MM	
MA-1280AS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ CIMA 3MM SOFT LINE	
MA-2001A	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ CIMA 4MM	
MA-2001AS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ CIMA 4MM SOFT LINE	
MA-1281A	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ CIMA 5MM	
MA-1281AS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 20CM P/ CIMA 5MM SOFT LINE	
MA-1286B	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ CIMA 1MM	
MA-1286BS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ CIMA 1MM SOFT LINE	

MA-1287B	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ CIMA 2MM	
MA-1287BS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ CIMA 2MM SOFT LINE	
MA-1280B	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ CIMA 3MM	
MA-1280BS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ CIMA 3MM SOFT LINE	
MA-2001B	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ CIMA 4MM	
MA-2001BS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ CIMA 4MM SOFT LINE	
MA-1281B	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ CIMA 5MM	
MA-1281BS	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 23CM P/ CIMA 5MM SOFT LINE	
MA-1286C	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 25CM P/ CIMA 1MM	
MA-1287C	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 25CM P/ CIMA 2MM	
MA-1280C	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 25CM P/ CIMA 3MM	
MA-2001C	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 25CM P/ CIMA 4MM	
MA-1281C	PINÇA KERRISON RETA 90° HASTE 25CM P/ CIMA 5MM	
MA-5950	PINÇA LANE 14CM C/ CREMALHEIRA	
MA-5951	PINÇA LANE 16CM C/ CREMALHEIRA	
MA-5952	PINÇA LANE 19CM C/ CREMALHEIRA	

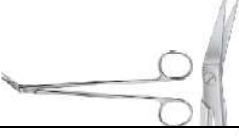
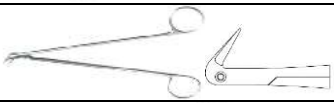
MA-5953	PINÇA LANE 25CM C/ CREMALHEIRA	
MA-1309F	PINÇA LOVE GRUENWALD 6X10MM RETA 18CM	
MA-1313A	PINÇA LOVE P/ BAIXO 15CM PONTA 2X10MM	
MA-1731A	PINÇA LOVE P/ BAIXO 15CM PONTA 2X5MM	
MA-1314A	PINÇA LOVE P/ BAIXO 15CM PONTA 3X10MM	
MA-1732A	PINÇA LOVE P/ BAIXO 15CM PONTA 3X5MM	
MA-1315A	PINÇA LOVE P/ BAIXO 15CM PONTA 4X10MM	
MA-1733A	PINÇA LOVE P/ BAIXO 15CM PONTA 4X5MM	
MA-2414	PINÇA LOVE P/ BAIXO 18CM PONTA 1X10MM	
MA-1313	PINÇA LOVE P/ BAIXO 18CM PONTA 2X10MM	
MA-1731	PINÇA LOVE P/ BAIXO 18CM PONTA 2X5MM	
MA-1314	PINÇA LOVE P/ BAIXO 18CM PONTA 3X10MM	
MA-1732	PINÇA LOVE P/ BAIXO 18CM PONTA 3X5MM	
MA-1315	PINÇA LOVE P/ BAIXO 18CM PONTA 4X10MM	
MA-1733	PINÇA LOVE P/ BAIXO 18CM PONTA 4X5MM	
MA-2414B	PINÇA LOVE P/ BAIXO 20CM PONTA 1X10MM	
MA-1313B	PINÇA LOVE P/ BAIXO 20CM PONTA 2X10MM	
MA-1731B	PINÇA LOVE P/ BAIXO 20CM PONTA 2X5MM	
MA-1314B	PINÇA LOVE P/ BAIXO 20CM PONTA 3X10MM	
MA-1732B	PINÇA LOVE P/ BAIXO 20CM PONTA 3X5MM	
MA-1315B	PINÇA LOVE P/ BAIXO 20CM PONTA 4X10MM	
MA-1733B	PINÇA LOVE P/ BAIXO 20CM PONTA 4X5MM	
MA-1313C	PINÇA LOVE P/ BAIXO 22CM PONTA 2X10MM	
MA-1731C	PINÇA LOVE P/ BAIXO 22CM PONTA 2X5MM	
MA-1314C	PINÇA LOVE P/ BAIXO 22CM PONTA 3X10MM	
MA-1732C	PINÇA LOVE P/ BAIXO 22CM PONTA 3X5MM	
MA-1315C	PINÇA LOVE P/ BAIXO 22CM PONTA 4X10MM	
MA-1733C	PINÇA LOVE P/ BAIXO 22CM PONTA 4X5MM	
MA-1313D	PINÇA LOVE P/ BAIXO 25CM PONTA 2X10MM	
MA-1731D	PINÇA LOVE P/ BAIXO 25CM PONTA 2X5MM	
MA-1314D	PINÇA LOVE P/ BAIXO 25CM PONTA 3X10MM	
MA-1732D	PINÇA LOVE P/ BAIXO 25CM PONTA 3X5MM	
MA-1315D	PINÇA LOVE P/ BAIXO 25CM PONTA 4X10MM	
MA-1733D	PINÇA LOVE P/ BAIXO 25CM PONTA 4X5MM	
MA-1313E	PINÇA LOVE P/ BAIXO 30CM PONTA 2X10MM	
MA-1314E	PINÇA LOVE P/ BAIXO 30CM PONTA 3X10MM	
MA-1315E	PINÇA LOVE P/ BAIXO 30CM PONTA 4X10MM	

MA-1310A	PINÇA LOVE P/ CIMA 15CM PONTA 2X10MM	
MA-2776A	PINÇA LOVE P/ CIMA 15CM PONTA 2X5MM	
MA-1311A	PINÇA LOVE P/ CIMA 15CM PONTA 3X10MM	
MA-2777A	PINÇA LOVE P/ CIMA 15CM PONTA 3X5MM	
MA-1312A	PINÇA LOVE P/ CIMA 15CM PONTA 4X10MM	
MA-2778A	PINÇA LOVE P/ CIMA 15CM PONTA 4X5MM	
MA-2515	PINÇA LOVE P/ CIMA 18CM PONTA 1X10MM	
MA-1310	PINÇA LOVE P/ CIMA 18CM PONTA 2X10MM	
MA-2776	PINÇA LOVE P/ CIMA 18CM PONTA 2X5MM	
MA-1311	PINÇA LOVE P/ CIMA 18CM PONTA 3X10MM	
MA-2777	PINÇA LOVE P/ CIMA 18CM PONTA 3X5MM	
MA-1312	PINÇA LOVE P/ CIMA 18CM PONTA 4X10MM	
MA-2778	PINÇA LOVE P/ CIMA 18CM PONTA 4X5MM	
MA-2515B	PINÇA LOVE P/ CIMA 20CM PONTA 1X10MM	
MA-1310B	PINÇA LOVE P/ CIMA 20CM PONTA 2X10MM	
MA-2776B	PINÇA LOVE P/ CIMA 20CM PONTA 2X5MM	
MA-1311B	PINÇA LOVE P/ CIMA 20CM PONTA 3X10MM	
MA-2777B	PINÇA LOVE P/ CIMA 20CM PONTA 3X5MM	
MA-1312B	PINÇA LOVE P/ CIMA 20CM PONTA 4X10MM	
MA-2778B	PINÇA LOVE P/ CIMA 20CM PONTA 4X5MM	
MA-1310C	PINÇA LOVE P/ CIMA 22CM PONTA 2X10MM	
MA-2776C	PINÇA LOVE P/ CIMA 22CM PONTA 2X5MM	
MA-1311C	PINÇA LOVE P/ CIMA 22CM PONTA 3X10MM	
MA-2777C	PINÇA LOVE P/ CIMA 22CM PONTA 3X5MM	
MA-1312C	PINÇA LOVE P/ CIMA 22CM PONTA 4X10MM	
MA-2778C	PINÇA LOVE P/ CIMA 22CM PONTA 4X5MM	
MA-1310D	PINÇA LOVE P/ CIMA 25CM PONTA 2X10MM	
MA-2776D	PINÇA LOVE P/ CIMA 25CM PONTA 2X5MM	
MA-1311D	PINÇA LOVE P/ CIMA 25CM PONTA 3X10MM	
MA-2777D	PINÇA LOVE P/ CIMA 25CM PONTA 3X5MM	
MA-1312D	PINÇA LOVE P/ CIMA 25CM PONTA 4X10MM	
MA-2778D	PINÇA LOVE P/ CIMA 25CM PONTA 4X5MM	
MA-1310E	PINÇA LOVE P/ CIMA 30CM PONTA 2X10MM	
MA-1311E	PINÇA LOVE P/ CIMA 30CM PONTA 3X10MM	
MA-1312E	PINÇA LOVE P/ CIMA 30CM PONTA 4X10MM	

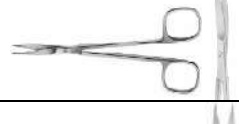
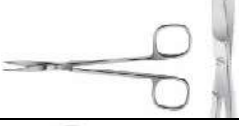
MA-1307 ^a	PINÇA LOVE RETA 15CM PONTA 2X10MM	
MA-2773A	PINÇA LOVE RETA 15CM PONTA 2X5MM	
MA-1308A	PINÇA LOVE RETA 15CM PONTA 3X10MM	
MA-2774A	PINÇA LOVE RETA 15CM PONTA 3X5MM	
MA-1309A	PINÇA LOVE RETA 15CM PONTA 4X10MM	
MA-2775A	PINÇA LOVE RETA 15CM PONTA 4X5MM	
MA-1306	PINÇA LOVE RETA 18CM PONTA 1X10MM	
MA-1307	PINÇA LOVE RETA 18CM PONTA 2X10MM	
MA-2773	PINÇA LOVE RETA 18CM PONTA 2X5MM	
MA-1308	PINÇA LOVE RETA 18CM PONTA 3X10MM	
MA-2774	PINÇA LOVE RETA 18CM PONTA 3X5MM	
MA-1309	PINÇA LOVE RETA 18CM PONTA 4X10MM	
MA-2775	PINÇA LOVE RETA 18CM PONTA 4X5MM	
MA-1306B	PINÇA LOVE RETA 20CM PONTA 1X10MM	
MA-1307B	PINÇA LOVE RETA 20CM PONTA 2X10MM	
MA-2773B	PINÇA LOVE RETA 20CM PONTA 2X5MM	
MA-1308B	PINÇA LOVE RETA 20CM PONTA 3X10MM	
MA-2774B	PINÇA LOVE RETA 20CM PONTA 3X5MM	
MA-1309B	PINÇA LOVE RETA 20CM PONTA 4X10MM	
MA-2775B	PINÇA LOVE RETA 20CM PONTA 4X5MM	
MA-1307C	PINÇA LOVE RETA 22CM PONTA 2X10MM	
MA-2773C	PINÇA LOVE RETA 22CM PONTA 2X5MM	
MA-1308C	PINÇA LOVE RETA 22CM PONTA 3X10MM	
MA-2774C	PINÇA LOVE RETA 22CM PONTA 3X5MM	
MA-1309C	PINÇA LOVE RETA 22CM PONTA 4X10MM	
MA-2775C	PINÇA LOVE RETA 22CM PONTA 4X5MM	
MA-2845	PINÇA LOVE RETA 23CM PONTA 3X10MM	
MA-1307D	PINÇA LOVE RETA 25CM PONTA 2X10MM	
MA-2773D	PINÇA LOVE RETA 25CM PONTA 2X5MM	
MA-1308D	PINÇA LOVE RETA 25CM PONTA 3X10MM	
MA-2774D	PINÇA LOVE RETA 25CM PONTA 3X5MM	
MA-1309D	PINÇA LOVE RETA 25CM PONTA 4X10MM	
MA-2775D	PINÇA LOVE RETA 25CM PONTA 4X5MM	
MA-1307E	PINÇA LOVE RETA 30CM PONTA 2X10MM	
MA-1308E	PINÇA LOVE RETA 30CM PONTA 3X10MM	
MA-1309E	PINÇA LOVE RETA 30CM PONTA 4X10MM	
MA-1110	PINÇA NICOLA 18,5CM PONTA BIÓPSIA	
MA-1110A	PINÇA NICOLA 18,5CM PONTA JACARÉ	

MA-1322	PINÇA OLDEBERG 18CM BOCA 6MM	
MA-3181	PINÇA SACA CÁLCIO P/ CIMA 20CM	
MA-3182	PINÇA SACA CÁLCIO P/ DIREITA 20CM	
MA-3183	PINÇA SACA CÁLCIO P/ ESQUERDA 20CM	
MA-3180	PINÇA SACA CÁLCIO RETA 20CM	
MA-3166	PINÇA SACA TROMBO CURVA 28CM	
MA-2467A	TESOURA ADSON 16CM CURVA	
MA-2467	TESOURA ADSON 16CM RETA	

MA-2892	TESOURA BALIU 20CM	
MA-1750A	TESOURA BEE-BEE P/ FIOS METÁLICOS 10,5CM CURVA	
MA-1750	TESOURA BEE-BEE P/ FIOS METÁLICOS 10,5CM RETA	
MA-3128	TESOURA BOYD 15CM CURVA	
MA-3129	TESOURA BOYD 18CM CURVA	
MA-3130	TESOURA BOYD 20CM CURVA	
MA-3130A	TESOURA CALCIFRED CURVA 23CM	
MA-7133	TESOURA CIRURGICA CURVA FINA FINA 10,5CM	
MA-7134	TESOURA CIRURGICA CURVA FINA FINA 12CM	
MA-1684	TESOURA CIRURGICA CURVA FINA FINA 14CM	
MA-7135	TESOURA CIRURGICA CURVA FINA FINA 15CM	
MA-1673	TESOURA CIRURGICA CURVA FINA FINA 17CM	
MA-1676	TESOURA CIRURGICA CURVA FINA FINA 19CM	
MA-7130	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA FINA 10,5CM	
MA-7131	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA FINA 12CM	
MA-1685	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA FINA 14CM	
MA-7132	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA FINA 15CM	
MA-1674	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA FINA 17CM	
MA-1677	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA FINA 19CM	
MA-7127	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA ROMBA 10,5CM	
MA-7128	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA ROMBA 12CM	
MA-1672	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA ROMBA 14CM	
MA-7129	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA ROMBA 15CM	
MA-1675	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA ROMBA 17CM	
MA-1678	TESOURA CIRURGICA CURVA ROMBA ROMBA 19CM	
MA-7124	TESOURA CIRURGICA RETA FINA FINA 10,5CM	
MA-7125	TESOURA CIRURGICA RETA FINA FINA 12CM	
MA-1679	TESOURA CIRURGICA RETA FINA FINA 14CM	
MA-7126	TESOURA CIRURGICA RETA FINA FINA 15CM	
MA-1686	TESOURA CIRURGICA RETA FINA FINA 17CM	
MA-1689	TESOURA CIRURGICA RETA FINA FINA 19CM	

MA-7121	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA FINA 10,5CM	
MA-7122	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA FINA 12CM	
MA-1682	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA FINA 14CM	
MA-7123	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA FINA 15CM	
MA-1687	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA FINA 17CM	
MA-1690	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA FINA 19CM	
MA-7115	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA ROMBA 10,5CM	
MA-7116	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA ROMBA 12CM	
MA-1683	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA ROMBA 14CM	
MA-7120	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA ROMBA 15CM	
MA-1688	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA ROMBA 17CM	
MA-1691	TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA ROMBA 19CM	
MA-1354	TESOURA DANDY TRIGEMINAL 19CM CURVA	
MA-3113	TESOURA DE BAKEY 25° 18CM	
MA-3114	TESOURA DE BAKEY 45° 18CM	
MA-3115	TESOURA DE BAKEY 60° 18CM	
MA-9095	TESOURA DE BAKEY OFFSET ANG. 45° 15,5CM	
MA-2359	TESOURA DIETRICH 125°	
MA-1989	TESOURA DIETRICH 130°	
MA-1756	TESOURA DIETRICH 25°	
MA-1757	TESOURA DIETRICH 45°	
MA-1754	TESOURA DIETRICH 60°	

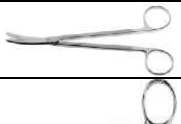
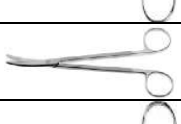
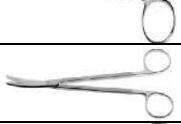
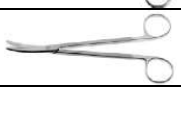
MA-1755	TESOURA DIETRICH 90°	
MA-3116	TESOURA DIETRICH C/ GUIA 18CM 130°	
MA-3148A	TESOURA ESMARCH P/ GESSO 20CM	
MA-3117	TESOURA FAVALORO 18CM 130°	
MA-1357	TESOURA FRAZIER P/ DURA 18CM	
MA-5498	TESOURA GOLDMAN FOX 13CM SERRILHADA	
MA-2659	TESOURA HEYMANN ANG. 18CM	
MA-8297	TESOURA IRIS 10,5CM CURVA	
MA-8297A	TESOURA IRIS 10,5CM RETA	
MA-8253	TESOURA IRIS 10CM CURVA	
MA-8252	TESOURA IRIS 10CM RETA	
MA-8255	TESOURA IRIS 11,5CM CURVA	
MA-8256	TESOURA IRIS 11,5CM RETA	

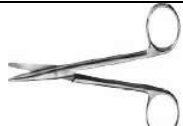
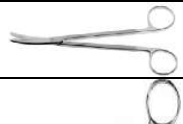
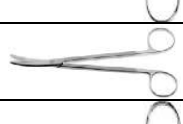
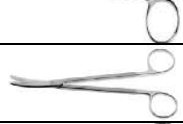
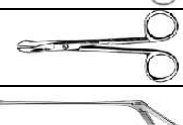
MA-8254	TESOURA IRIS 11CM CURVA	
MA-4552	TESOURA IRIS 11CM RETA	
MA-1692	TESOURA IRIS 12CM CURVA	
MA-1693	TESOURA IRIS 12CM RETA	
MA-3145A	TESOURA JOSEPH 14CM CURVA	
MA-3145B	TESOURA JOSEPH 14CM RETA	
MA-6130	TESOURA KILNER 12CM	
MA-1821	TESOURA LISTER 14CM	
MA-1822	TESOURA LISTER 17CM	
MA-1823	TESOURA LISTER 19CM	
MA-2476	TESOURA LISTER 20CM	
MA-1359	TESOURA LITTAUER 13,5CM	
MA-2440	TESOURA MALIS 18CM CURVA	
MA-1668	TESOURA MAYO 14CM CURVA	
MA-1669	TESOURA MAYO 14CM RETA	
MA-3733	TESOURA MAYO 15CM CURVA	

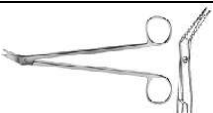
MA-1668A	TESOURA MAYO 15CM RETA	
MA-2195	TESOURA MAYO 16CM CURVA	
MA-8293	TESOURA MAYO 16CM RETA	
MA-1670	TESOURA MAYO 17CM CURVA	
MA-1671	TESOURA MAYO 17CM RETA	
MA-1752	TESOURA MAYO 18CM CURVA	
MA-1753	TESOURA MAYO 18CM RETA	
MA-1694	TESOURA MAYO 19CM CURVA	
MA-1696	TESOURA MAYO 19CM RETA	
MA-1992	TESOURA MAYO 20CM CURVA	
MA-1920	TESOURA MAYO 20CM RETA	
MA-1695	TESOURA MAYO 22CM CURVA	
MA-2735	TESOURA MAYO 22CM RETA	
MA-3851	TESOURA MAYO 23CM CURVA	
MA-6560	TESOURA MAYO 23CM RETA	
MA-1920A	TESOURA MAYO 25CM CURVA	

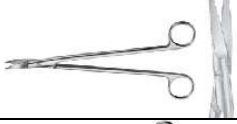
MA-4194	TESOURA MAYO 25CM RETA	
MA-8298	TESOURA MAYO STILLE 14CM CURVA	
MA-8594	TESOURA MAYO STILLE 14CM RETA	
MA-5039	TESOURA MAYO STILLE 15CM CURVA	
MA-3733A	TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA	
MA-6208	TESOURA MAYO STILLE 16CM CURVA	
MA-6209	TESOURA MAYO STILLE 16CM RETA	
MA-5517	TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA	
MA-6249	TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA	
MA-7113	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	
MA-7112	TESOURA MAYO STILLE 19CM RETA	
MA-6025A	TESOURA MAYO-HARRINGTON 22CM CURVA	

MA-6025	TESOURA MAYO-HARRINGTON 22CM RETA	
MA-7087	TESOURA METZENBAUM 10CM CURVA	
MA-7086	TESOURA METZENBAUM 10CM RETA	
MA-8259	TESOURA METZENBAUM 11,5CM CURVA	
MA-7087A	TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA	
MA-0503	TESOURA METZENBAUM 12CM RETA	
MA-1635	TESOURA METZENBAUM 14CM CURVA	
MA-1636	TESOURA METZENBAUM 14CM RETA	
MA-3124	TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA	
MA-3120	TESOURA METZENBAUM 15CM RETA	
MA-1740	TESOURA METZENBAUM 16CM CURVA	
MA-1745	TESOURA METZENBAUM 16CM RETA	
MA-2140	TESOURA METZENBAUM 17CM CURVA	
MA-8296	TESOURA METZENBAUM 17CM RETA	
MA-3125	TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA	

MA-3121	TESOURA METZENBAUM 18CM RETA	
MA-3126	TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA	
MA-3122	TESOURA METZENBAUM 20CM RETA	
MA-1642	TESOURA METZENBAUM 22CM CURVA	
MA-1643	TESOURA METZENBAUM 22CM RETA	
MA-3127	TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA	
MA-3123	TESOURA METZENBAUM 23CM RETA	
MA-1644	TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA	
MA-1645	TESOURA METZENBAUM 25CM RETA	
MA-3123B	TESOURA METZENBAUM 26CM CURVA	
MA-4180	TESOURA METZENBAUM 26CM RETA	
MA-1646	TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA	
MA-1647	TESOURA METZENBAUM 28CM RETA	
MA-1648	TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA	
MA-1649	TESOURA METZENBAUM 30CM RETA	
MA-2230	TESOURA METZENBAUM 33CM CURVA	

MA-2386	TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA	
MA-4506	TESOURA METZENBAUM 35CM RETA	
MA-3899	TESOURA METZENBAUM 45CM CURVA	
MA-1709	TESOURA METZENBAUM DELICADA 14CM CURVA	
MA-1713	TESOURA METZENBAUM DELICADA 14CM RETA	
MA-8261	TESOURA METZENBAUM DELICADA 15CM CURVA	
MA-8262	TESOURA METZENBAUM DELICADA 15CM RETA	
MA-1710	TESOURA METZENBAUM DELICADA 18CM CURVA	
MA-1714	TESOURA METZENBAUM DELICADA 18CM RETA	
MA-1711	TESOURA METZENBAUM DELICADA 20CM CURVA	
MA-1715	TESOURA METZENBAUM DELICADA 20CM RETA	
MA-1712	TESOURA METZENBAUM DELICADA 22CM CURVA	
MA-1716	TESOURA METZENBAUM DELICADA 22CM RETA	
MA-3123C	TESOURA METZENBAUM DELICADA 26CM CURVA	
MA-2441	TESOURA MIXTER 15CM RETA	
MA-1358	TESOURA OLIVERCRONA P/ DURA 16CM	

MA-7465	TESOURA P/ CORDÃO UMBILICAL 10CM	
MA-1356	TESOURA POTTS 18CM PONTA C/ 25°	
MA-1356A	TESOURA POTTS 18CM PONTA C/ 40°	
MA-1356B	TESOURA POTTS 18CM PONTA C/ 60°	
MA-1356C	TESOURA POTTS 18CM PONTA C/ 90°	
MA-3110	TESOURA POTTS-SMITH 25° 19CM	
MA-3111	TESOURA POTTS-SMITH 45° 19CM	
MA-3112	TESOURA POTTS-SMITH 60° 19CM	
MA-3584	TESOURA REYNOLDS 14CM	
MA-3596	TESOURA REYNOLDS 17CM	
MA-5183	TESOURA SATINSKY 18CM	
MA-2330	TESOURA SCHUMACHER 15,5CM P/ CORDÃO UMBILICAL	
MA-0996	TESOURA SIMS 20CM CURVA	
MA-2567	TESOURA SIMS 20CM RETA	

MA-1360A	TESOURA SPENCER 12CM RETA	
MA-1360	TESOURA SPENCER 9CM RETA	
MA-3465	TESOURA STEVENS CURVA 10CM	
MA-3464	TESOURA STEVENS RETA 10CM	
MA-1351A	TESOURA STRULLY 18CM CURVA PONTA FINA	
MA-1351	TESOURA STRULLY 18CM CURVA PONTA ROMBA	
MA-1348A	TESOURA STRULLY 18CM RETA PONTA FINA	
MA-1348	TESOURA STRULLY 18CM RETA PONTA ROMBA	
MA-1352A	TESOURA STRULLY 20CM CURVA PONTA FINA	
MA-1352	TESOURA STRULLY 20CM CURVA PONTA ROMBA	
MA-1349A	TESOURA STRULLY 20CM RETA PONTA FINA	
MA-1349	TESOURA STRULLY 20CM RETA PONTA ROMBA	
MA-1353A	TESOURA STRULLY 22CM CURVA PONTA FINA	
MA-1353	TESOURA STRULLY 22CM CURVA PONTA ROMBA	
MA-1350A	TESOURA STRULLY 22CM RETA PONTA FINA	

MA-1350	TESOURA STRULLY 22CM RETA PONTA ROMBA	
MA-7114	TESOURA UNIVERSAL P/ FIO DE AÇO 12CM	
MA-80501	CORTADOR MODELADOR DE FIO E HASTE	

5. Forma de Apresentação

Os produtos Instrumentais Articulados Cortantes são fornecidos montados, pronto para uso.

O produto é fornecido individualmente em embalagem plástica.

O rótulo (etiqueta de rastreabilidade), contém as seguintes informações:

- Nome Comercial do produto
- Nome Técnico do produto
- Modelo Comercial do produto
- Número do lote
- Quantidade
- Número do registro ANVISA
- Data de fabricação
- Validade

6. Orientações sobre o uso do produto

O instrumental cirúrgico deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, e dessa forma, cabe ao cirurgião a escolha do método a ser empregado, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

Os Instrumentais Cirúrgicos Articulados Cortantes Macom são fornecidos na condição montado, pronto para uso. Produto não estéril, devendo ser esterilizado, obrigatoriamente, antes de sua utilização.

7. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais sobre o uso do produto:

Na Limpeza e Conservação:

Para garantir uma melhor conservação deste produto deve-se utilizar as Resoluções RDC 15/2012, RE 2606/06 e RE 2305/07 que contém orientações relativas aos cuidados necessários com o instrumental cirúrgico, e com o CME, garantindo a conservação do produto e a eficácia e segurança dos procedimentos cirúrgicos.

É necessário que as instruções de limpeza sejam corretamente seguidas.

Antes do primeiro uso, todos os instrumentais devem ser completamente limpos antes da esterilização.

Este produto precisa ser submetido ao processo de limpeza o mais imediato possível após sua utilização, a fim de evitar incrustações, sangue e soluções salinas são altamente corrosivos.

Não utilize produtos químicos, desinfetantes à base de cloro e/ou abrasivos, soluções ácidas ou alcalinas, ou hipoclorito de sódio para evitar riscos de corrosão ou manchas.

Antes de serem embalados para estocagem, todos os instrumentais devem estar completamente secos

Para conservação, mantenha o produto sempre limpo, desinfetado, lubrificado e acondicionado, disponível para sua pronta utilização.

Na Esterilização:

Antes da esterilização os instrumentais cirúrgicos devem ser limpos, lavados, enxaguados abundantemente e secados completamente para posterior esterilização. O excesso de umidade pode ser uma fonte de mancha para o seu instrumental.

Como procedimento auxiliar de limpeza e esterilização pode-se utilizar detergente enzimático, **com posterior enxágue em água e secagem. Não deixar o instrumental imerso em qualquer substância líquida.**

A Macom recomenda que os instrumentais sejam esterilizados por Vapor Saturado de Alta Temperatura (Auto Clave) nos parâmetros 134°C / 10 minutos. Tempo de secagem recomendado 30 minutos.

Nunca ultrapasse a temperatura máxima de 135°C para proceder à esterilização.

Na Lubrificação:

Após a limpeza e esterilização das partes e peças deste produto e antes do acondicionamento deve-se, primeiramente secar bem todas as partes e acessórios, e posteriormente lubrificar o produto, principalmente suas articulações.

O uso de óleos a base de petróleo (vaselina, silicone, lubrificantes, aerossóis,...) devem ser evitados, pois atacam os materiais deste produto. Lubrificantes minerais, não oleosos, podem ser aplicados, protegendo-o de oxidação e mantendo maleável durante sua utilização.

O processo de lubrificação deve ocorrer sempre que o produto for utilizado.

Na utilização:

O instrumental cirúrgico deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

Produto **não estéril**, devendo ser esterilizado, **obrigatoriamente**, antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentais cirúrgicos.

Verifique sempre a data de vencimento da sua esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Retire o produto da embalagem somente no momento da utilização.

Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado, a fim de evitar o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento.

O instrumental não deve sofrer queda, pancadas e não deve ficar exposto à materiais ou produtos abrasivos.

No transporte e armazenamento:

O instrumental cirúrgico deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem o instrumental deve atender às seguintes exigências: o instrumental cirúrgico deve ser armazenado em local limpo, seco, ao abrigo de luz natural, longe de umidade, e isento de contaminação particulada. Os Produtos devem estar armazenados de forma que sua integridade e características mecânicas se mantenham preservadas; Não se deve estocar os Instrumentais Cirúrgicos junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos e contaminantes.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular o instrumental cirúrgico cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Na manutenção:

A função e a segurança dos produtos Macom somente são garantidas se os serviços de manutenção e reparos forem realizados pela Assistência Técnica Macom ou Assistência Técnica Autorizada Macom.

A Macom não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com consequências ao paciente em função de manutenções impróprias, não efetuadas pela nossa Assistência Técnica.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.

Para todo tipo de manutenção, dentro ou fora da garantia, procure sempre a Assistência Técnica autorizada Macom. Não deixe que terceiros, sem qualificação técnica adequada, venha a danificar ou mudar as características originais do seu produto.

8. Garantia e Assistência Técnica

- ◆ Como todos os instrumentais cirúrgicos marca Macom®, este também recebe garantia total de 10 (dez) anos contra possíveis defeitos de fabricação, exceto uso indevido.
- ◆ Para todo tipo de manutenção, dentro ou fora da garantia, procure sempre a Assistência Técnica autorizada Macom.

9. Origem do Produto

- ◆ Fabricado por:
Av. João Bassi, 572 – Pq. Industrial Ferreira Fernandes
CEP 07172-440 – Guarulhos / SP – BRASIL
Fone/Fax: +55 11 2431-4636
site: www.macominstrumental.com.br
e-mail: sac@macominstrumental.com.br / macom@macominstrumental.com.br
- ◆ Responsável Técnico
Eng. Alexandre Emiliano Muniz
CREA-SP 5062354150

REV.01/23