

1. Introdução

A FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA ALIF MACOM são instrumentais cirúrgicos reutilizáveis, indicados para procedimento da coluna vertebral por via anterior, são utilizados para tratar patologias da coluna vertebral por via anterior tais como, degeneração discal, hérnia de disco, espondilolistese e outras condições que causam dor lombar crônica.

A FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA ALIF MACOM deve ser utilizada em conjunto com o AFASTADOR MINI OPEN - DR. AÉCIO DIAS, modelo MA-70000HN, registro ANVISA 10243070096 (este produto não é objeto deste processo de notificação - produto comercializado separadamente).

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

2. Especificações e características técnicas

Os Instrumentais Cirúrgicos Alif Macom são fabricados em aço inoxidável AISI 420, de acordo com a norma ANBT NBR ISO 7153-1.

Esta família de instrumentais pode apresentar articulação, além de corte em sua ponta, possui diversos tamanhos e diferentes formas, os quais definem o tipo e o código do produto.

Os Instrumentais Alif Macom são fornecidos na condição montado, pronto para uso. Produto não estéril, devendo ser esterilizado, obrigatoriamente, antes de sua utilização.

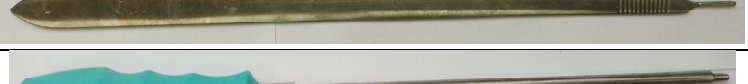
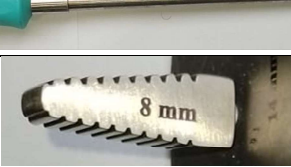
3. Registro ANVISA

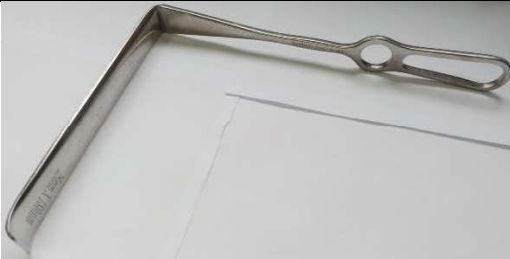
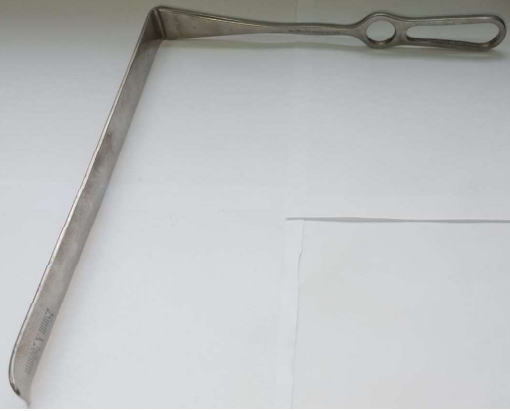
Nº 10243070101.

4. Modelo Comercial

MODELO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	IMAGEM
MA-54002	PINÇA GOIVA SYPERT BIARTICULADA 36CM RETO 8MM (abert. 14mm)	
MA-54003	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 30CM P/ CIMA 2MM	
MA-54004	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 30CM P/ CIMA 3MM	

MA-54005	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 30CM P/ CIMA 4MM	
MA-54006	PINÇA KERRISON ANG. 40° HASTE 30CM P/ CIMA 5MM	
MA-54007	PINÇA CLOWARD RETA 30CM PONTA 2X10MM	
MA-54009	PINÇA CLOWARD RETA 30CM PONTA 3X10MM	
MA-54010	PINÇA CLOWARD RETA 30CM PONTA 5X10MM	
MA-54011	CURETA SIMON 45CM PONTA RETA FIG. 000	
MA-54012	CURETA SIMON 45CM PONTA ANG. FIG. 000	
MA-54013	CURETA SIMON 45CM PONTA RETA FIG. 00	
MA-54014	CURETA SIMON 45CM PONTA ANG. FIG. 00	
MA-54015	CURETA SIMON 45CM PONTA RETA FIG. 1	
MA-54016	CURETA SIMON 45CM PONTA ANG. FIG. 1	
MA-54017	ELEVADOR COBB 45CM LÂMINA RETA 20MM	

MA-54001	ALICATE DE PRESSÃO 20CM (EM AÇO INOX)	
MA-54020	ELEVADOR COBB 45CM LÂMINA CURVO 25MM	
MA-54018	ELEVADOR COBB 45CM LÂMINA RETA 25MM	
MA-54019	ELEVADOR COBB 45CM LÂMINA CURVO 20MM	
MA-54021	DESCOLADOR PENFIELD Nº 5 30CM DELICADO	
MA-54022	CINZEL CLOWARD 42CM X 7MM	
MA-54023	CINZEL CLOWARD 42CM X 10MM	
MA-54024	CINZEL CLOWARD 42CM X 17MM ALIF	
MA-54025	CABO DE BISTURI LONGO Nº03 32CM - CABO CHATO	
MA-54028	CHAVE DE DISTRATORES DE CUNHA 6MM DE ROSCA	
MA-54029	DISTRATOR DE CUNHA 8MM	
MA-54030	DISTRATOR DE CUNHA 10MM	
MA-54031	DISTRATOR DE CUNHA 12MM	
MA-54032	DISTRATOR DE CUNHA 14MM	

MA-54033	MARTELO DE TEFLON 230G	
MA-54034	AFASTADOR LANGENBECK 180MM X 25 MM	
MA-54035	AFASTADOR LANGENBECK 220MM X 25 MM OBESO	
MA-54036	AFASTADOR LANGENBECK 260MM X 30 MM OBESO	
MA-54037	CURETA CASPAR QUADRADA 45CM PONTA 13MM	
MA-54038	CURETA CASPAR QUADRADA 45CM PONTA 15MM	
MA-54039	RASPA DUPLA 43CM 12MM (LIMA)	
MA-54040	DESCOLADOR BAIONETA 32CM P/CIMA 4MM	

5. Forma de Apresentação

Os produtos Instrumentais Alif são fornecidos montados, pronto para uso.

O produto é fornecido individualmente em embalagem plástica.

O rótulo (etiqueta de rastreabilidade), contém as seguintes informações:

- a) Nome Comercial do produto
- b) Nome Técnico do produto
- c) Modelo Comercial do produto
- d) Número do lote
- e) Quantidade
- f) Número do registro ANVISA
- g) Data de fabricação
- h) Validade

6. Orientações sobre o uso do produto

O instrumental cirúrgico Alif deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, e dessa forma, cabe ao cirurgião a escolha do método a ser empregado, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

Os Instrumentais Cirúrgicos Alif Macom são fornecidos na condição montado, pronto para uso. Produto não estéril, devendo ser esterilizado, obrigatoriamente, antes de sua utilização.

7. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais sobre o uso do produto:

7.1 Na Limpeza e Conservação:

Para garantir uma melhor conservação deste produto deve-se utilizar as Resoluções RDC 15/2012, RE 2606/06 e RE 2305/07 que contém orientações relativas aos cuidados necessários com o instrumental cirúrgico, e com o CME, garantindo a conservação do produto e a eficácia e segurança dos procedimentos cirúrgicos.

É necessário que as instruções de limpeza sejam corretamente seguidas.

Antes do primeiro uso, todos os instrumentais devem ser completamente limpos antes da esterilização.

Este produto precisa ser submetido ao processo de limpeza o mais imediato possível após sua utilização, a fim de evitar incrustações, sangue e soluções salinas são altamente corrosivos.

Não utilize produtos químicos, desinfetantes à base de cloro e/ou abrasivos, soluções ácidas ou alcalinas, ou hipoclorito de sódio para evitar riscos de corrosão ou manchas.

Antes de serem embalados para estocagem, todos os instrumentais devem estar completamente secos

Para conservação, mantenha o produto sempre limpo, desinfetado, lubrificado e acondicionado, disponível para sua pronta utilização.

7.2. Na Esterilização:

Antes da esterilização os instrumentais cirúrgicos devem ser limpos, lavados, enxaguados abundantemente e secados completamente para posterior esterilização. O excesso de umidade pode ser uma fonte de mancha para o seu instrumental.

Como procedimento auxiliar de limpeza e esterilização pode-se utilizar detergente enzimático, **com posterior enxágue em água e secagem. Não deixar o instrumental imerso em qualquer substância líquida.**

A Macom recomenda que os instrumentais sejam esterilizados por Vapor Saturado de Alta Temperatura (Auto Clave) nos parâmetros 134°C / 10 minutos. Tempo de secagem recomendado 30 minutos.

Nunca ultrapasse a temperatura máxima de 135°C para proceder à esterilização.

7.3. Na Lubrificação:

Após a limpeza e esterilização das partes e peças deste produto e antes do acondicionamento deve-se primeiramente secar bem todas as partes e acessórios, e posteriormente lubrificar o produto, principalmente suas articulações.

O uso de óleos a base de petróleo (vaselina, silicone, lubrificantes, aerossóis, ...) devem ser evitados, pois atacam os materiais deste produto. Lubrificantes minerais, não oleosos, podem ser aplicados, protegendo-o de oxidação e mantendo maleável durante sua utilização.

O processo de lubrificação deve ocorrer sempre que o produto for utilizado.

7.4. Na utilização:

O instrumental cirúrgico deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

Produto **não estéril**, devendo ser esterilizado, **obrigatoriamente**, antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentais cirúrgicos.

Verifique sempre a data de vencimento da sua esterilização, bem como a integridade da embalagem. Não utilize o produto se a data de validade da esterilização estiver vencida.

Verifique se a embalagem não está violada, se não apresenta furos, manchas ou falhas nas laterais da embalagem. Retire o produto da embalagem somente no momento da utilização.

Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado, a fim de evitar o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento.

O instrumental não deve sofrer queda, pancadas e não deve ficar exposto à materiais ou produtos abrasivos.

7.5. No transporte e armazenamento:

O instrumental cirúrgico deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem o instrumental deve atender às seguintes exigências: o instrumental cirúrgico deve ser armazenado em local limpo, seco, ao abrigo de luz natural, longe de umidade, e isento de contaminação particulada. Os Produtos devem estar armazenados de forma que sua integridade e características mecânicas se mantenham preservadas; Não se deve estocar os instrumentais cirúrgicos junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos e contaminantes.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular o instrumental cirúrgico cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

7.6. Na manutenção:

A função e a segurança dos produtos Macom somente são garantidas se os serviços de manutenção e reparos forem realizados pela Assistência Técnica Macom ou Assistência Técnica Autorizada Macom.

A Macom não assume a responsabilidade por danos que eventualmente ocorram neste produto e com consequências ao paciente em função de manutenções impróprias, não efetuadas pela nossa Assistência Técnica.

Os materiais empregados na concepção deste produto visam garantir a perfeita operação dos mesmos de acordo com suas características originais.

Para todo tipo de manutenção, dentro ou fora da garantia, procure sempre a Assistência Técnica autorizada Macom. Não deixe que terceiros, sem qualificação técnica adequada, venha a danificar ou mudar as características originais do seu produto.

8. Garantia e Assistência Técnica

Como todos os instrumentais cirúrgicos marca Macom®, este também recebe garantia total de 10 (dez) anos contra possíveis defeitos de fabricação, exceto uso indevido.

Para todo tipo de manutenção, dentro ou fora da garantia, procure sempre a Assistência Técnica autorizada Macom.

9. Origem do Produto

Fabricado por:

Av. João Bassi, 572 – Pq. Industrial Ferreira Fernandes

CEP 07172-440 – Guarulhos / SP – BRASIL

Fone/Fax: +55 11 2431-4636

site: www.macominstrumental.com.br

e-mail: sac@macominstrumental.com.br / macom@macominstrumental.com.br

Responsável Técnico

Eng. Alexandre Emiliano Muniz

CREA-SP 5062354150

REV.01/23